

IT - ELI Carrier

Strumenti canalari meccanici

Descrizione

ELI Carrier (spingipasta) con molla è il lentulo ideale, realizzato in acciaio inox, per l'introduzione di cementi e medicinali all'interno dei canali. Flessibilità e sicurezza sono garantite grazie alla breve molla posta tra la spirale e il gambo.

Indicazioni

Da utilizzare solo in studio odontoiatrico o in ambito ospedaliero da personale qualificato.

Campo di applicazione

Per il cateterismo e la definizione della forma.

Misure

ELI Carrier			
	21 mm	25 mm	29 mm
● 25	7300900	7300905	7300910
● 30	7300901	7300906	7300911
● 35	7300902	7300907	7300912
● 40	7300903	7300908	7300913
06-15	7300904	7300909	7300914

Confezionamento

Dispositivo non sterile in blister da 4 pezzi (assortiti o singole misure)

Procedura raccomandata

Protocollo operativo:

- Inserire nel canale lo strumento coperto di cemento e di seguito estrarlo lentamente con un movimento rotatorio.
- Durante la sequenza endodontica, irrigare ripetutamente con ipoclorito e E.D.T.A. al fine di eliminare tutto il tessuto necrotico e la componente organica del fango dentinale.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da umidità e lontano da fonti di luce diretta.

Precauzioni

Prima dell'uso, si raccomanda di verificare con i pazienti l'eventuale allergia alle materie prime. Si raccomanda di utilizzare sempre guanti chirurgici per la protezione individuale da contaminazione batterica. La mancata osservanza di questa regola può comportare infezioni crociate.

Avvertenze

- Dispositivo monouso, non è consigliato il riutilizzo per limitare i problemi legati alle infezioni crociate e/o alle rotture.
- Non utilizzare il blister se aperto o danneggiato.
- Non forzare mai lo strumento nel canale.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

Non utilizzare in pazienti con sensibilità allergica nota alle materie prime.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Eli-Dent Group S.p.A.
Via Guido Rossa, 24 A/B/C - 50032
Borgo San Lorenzo (FI) - www.elidentgroup.it
Tel. +39 055 600545 - Fax +39 055 601069

EN - ELI Carrier

Mechanical root canal instruments

Description

ELI Carrier with spring is the ideal lentulo, made of stainless steel, for introducing cements and medicaments into canals. Flexibility and safety are guaranteed thanks to the short spring between the spiral and the shank.

Indications

For use in dental practices or hospitals by qualified personnel only.

Field of application

For catheterisation and shape definition.

Measurements

ELI Carrier			
	21 mm	25 mm	29 mm
● 25	7300900	7300905	7300910
● 30	7300901	7300906	7300911
● 35	7300902	7300907	7300912
● 40	7300903	7300908	7300913
06-15	7300904	7300909	7300914

Packaging

Non-sterile device in blister pack of 4 pieces (assorted or individual sizes).

Recommended procedure

Operating protocol:

- Insert the cement-covered instrument into the canal and then slowly pull it out in a rotary motion.
- During the endodontic sequence, irrigate repeatedly with hypochlorite and E.D.T.A. in order to remove all necrotic tissue and the organic component of the dentinal sludge.

Storage

Store at room temperature, away from moisture and direct light.

Precautions

Before use, it is recommended to check with patients for any allergy to raw materials. It is recommended to always use surgical gloves for personal protection against bacterial contamination. Failure to do so may result in cross-infection.


Warnings

- Single-use device, re-use is not recommended to limit problems with cross-infection and/or breakage.
- Do not use the blister if opened or damaged.
- Never force the instrument into the canal.
- Do not use after the indicated expiry date.
- You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device we have supplied to the manufacturer and to the competent authority in your Member State.

Contraindications

Do not use in patients with known allergic sensitivity to raw materials.

Symbols

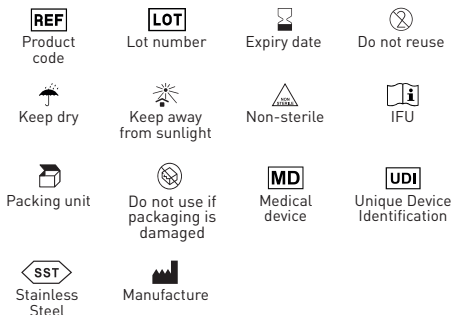

Warranty

Dental World shall replace the product if it proves to be defective.

Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, resulting from careless use or inability to use the product described. Before use, it is the user's responsibility to determine the appropriateness of the product for its use. The user assumes responsibility for use careless use.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Eli-Dent Group S.p.A.
Via Guido Rossa, 24 A/B/C - 50032
Borgo San Lorenzo (FI) - www.elidentgroup.it
Tel. +39 055 600545 - Fax +39 055 601069

FR - ELI Carrier

Instruments mécaniques pour le traitement du canal radiculaire

Description

ELI Carrier avec ressort est le lentulo idéal, en acier inoxydable, pour l'introduction de ciments et de médicaments dans les canaux. La flexibilité et la sécurité sont garanties grâce au ressort court entre la spirale et la tige.

Indications

Utilisation dans les cabinets dentaires ou les hôpitaux par du personnel qualifié uniquement.

Domaine d'application

Pour le cathétérisme et la définition de la forme.

Mesures

ELI Carrier			
	21 mm	25 mm	29 mm
● 25	7300900	7300905	7300910
● 30	7300901	7300906	7300911
● 35	7300902	7300907	7300912
● 40	7300903	7300908	7300913
06-15	7300904	7300909	7300914

Conditionnement

Dispositif non stérile sous blister de 4 pièces (assorties ou de tailles individuelles).

Procédure recommandée

Protocole opératoire :

- Insérer l'instrument recouvert de ciment dans le canal et le retirer lentement par un mouvement de rotation.
- Pendant la séquence endodontique, irriguer à plusieurs reprises avec de l'hypochlorite et de l'E.D.T.A. afin d'éliminer tous les tissus nécrotiques et la composante organique de la boue dentinaire.

Conservation

Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe.

Précautions d'emploi

Avant utilisation, il est recommandé de vérifier auprès des patients l'absence d'allergie aux matières premières.

Il est recommandé de toujours utiliser des gants chirurgicaux pour se protéger contre la contamination bactérienne. Le non-respect de

cette consigne peut entraîner une infection croisée.


Avertissements

- Dispositif à usage unique, la réutilisation n'est pas recommandée pour limiter les problèmes d'infection croisée et/ou de rupture.
- Ne pas utiliser le blister s'il est ouvert ou endommagé.
- Ne jamais forcer l'instrument dans le canal.
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée.
- Vous devez signaler au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre tout incident grave lié au dispositif médical que nous avons fourni.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité allergique connue aux matières premières.

Symboles

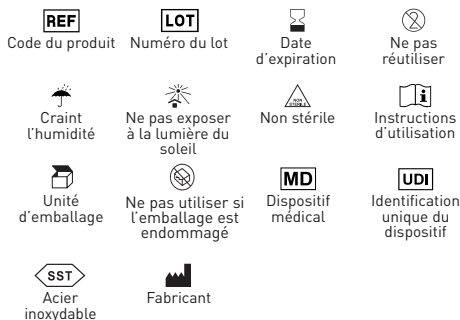

Garantie

Dental World remplacera le produit s'il s'avère défectueux.

Dental World n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct ou consécutif, résultant de l'utilisation négligente ou de l'incapacité d'utiliser le produit décrit. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à son utilisation. L'utilisateur assume la responsabilité de l'utilisation négligente.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Eli-Dent Group S.p.A.
Via Guido Rossa, 24 A/B/C - 50032
Borgo San Lorenzo (FI) - www.elidentgroup.it
Tel. +39 055 600545 - Fax +39 055 601069