

IT - ELI Largo & ELI Gates

Strumenti canalari meccanici

Descrizione

ELI Largo & ELI Gates sono frese in acciaio inox per canali radicolari.

Indicazioni

Da utilizzare solo in studio odontoiatrico o in ambito ospedaliero da personale qualificato.

Campo di applicazione

Per l'allargamento dei canali radicolari.

Misure

ELI Largo		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	7300920	7300927
n°2 - 0,9	7300921	7300928
n°3 - 1,1	7300922	7300929
n°4 - 1,3	7300923	7300930
n°5 - 1,5	7300924	7300931
n°6 - 1,7	7300925	7300932
Ass. n°1 - 6	7300926	7300933

ELI Gates		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	7300940	7300947
n°2 - 0,7	7300941	7300948
n°3 - 0,9	7300942	7300949
n°4 - 1,5	7300943	7300950
n°5 - 1,3	7300944	7300951
n°6 - 1,5	7300945	7300952
Ass. n°1 - 6	7300946	7300953

Confezionamento

Dispositivo non sterile in blister da 6 pezzi (assortiti o singole misure).

Procedura raccomandata

Protocollo operativo:

- Utilizzare in qualsiasi manipolo ad angolo retto per allargare la porzione coronale del canale per la rimozione massiva della struttura.
- Durante la sequenza endodontica, irrigare ripetutamente con ipoclorito e E.D.T.A. al fine di eliminare tutto il tessuto necrotico e la componente organica del fango dentinale.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da umidità e lontano da fonti di luce diretta.

Precauzioni

Prima dell'uso, si raccomanda di verificare con i pazienti l'eventuale allergia alle materie prime.

Si raccomanda di utilizzare sempre guanti chirurgici per la protezione individuale da contaminazione batterica. La mancata osservanza di questa regola può comportare infezioni crociate.

Avvertenze

- Dispositivo monouso, non è consigliato il riutilizzo per limitare i problemi legati alle infezioni crociate e/o alle rotture.
- Non utilizzare il blister se aperto o danneggiato.
- Non forzare mai lo strumento nel canale.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

Non utilizzare in pazienti con sensibilità allergica nota alle materie prime.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastiggi, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Eli-Dent Group S.p.A.
Via Guido Rossa, 24 A/B/C - 50032
Borgo San Lorenzo (FI) - www.elidentgroup.it
Tel. +39 055 600545 - Fax +39 055 601069

EN - ELI Largo & ELI Gates

Mechanical root canal instruments

Description

ELI Largo & ELI Gates are stainless steel burs for root canals.

Indications

Only to be used in dental practices or in hospitals by qualified personnel.

Field of application

For enlarging root canals.

Measures

ELI Largo		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	7300920	7300927
n°2 - 0,9	7300921	7300928
n°3 - 1,1	7300922	7300929
n°4 - 1,3	7300923	7300930
n°5 - 1,5	7300924	7300931
n°6 - 1,7	7300925	7300932
Ass. n°1 - 6	7300926	7300933

ELI Gates		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	7300940	7300947
n°2 - 0,7	7300941	7300948
n°3 - 0,9	7300942	7300949
n°4 - 1,5	7300943	7300950
n°5 - 1,3	7300944	7300951
n°6 - 1,5	7300945	7300952
Ass. n°1 - 6	7300946	7300953

Packaging

Non-sterile device in blister pack of 6 pieces (assorted or individual sizes).

Recommended procedure

Operating protocol:

- Use in any right angle handpiece to widen the coronal portion of the canal for the massive removal of structure.
- During the endodontic sequence, repeatedly irrigate with hypochlorite and E.D.T.A. to remove all necrotic tissue and the organic component of the dentinal slurry.

Storage

Store at room temperature, away from moisture and direct light.

Precautions

Before use, it is recommended to check with patients for any allergy to raw materials.

It is recommended to always use surgical gloves for personal protection against bacterial contamination. Failure to do so may result in cross-infection.


Warnings

- Single-use device, re-use is not recommended to limit problems with cross-infection and/or breakage.
- Do not use the blister if opened or damaged.
- Never force the instrument into the canal.
- Do not use after the indicated expiry date.
- You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device we have supplied to the manufacturer and to the competent authority in your Member State.

Contraindications

Do not use in patients with known allergic sensitivity to raw materials.

Symbols

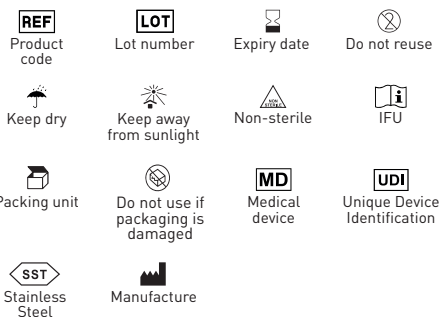


Warranty

Dental World shall replace the product if it proves to be defective.

Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, resulting from careless use or inability to use the product described. Before use, it is the user's responsibility to determine the appropriateness of the product for its use. The user assumes responsibility for use careless use.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

 Eli-Dent Group S.p.A.
Via Guido Rossa, 24 A/B/C - 50032
Borgo San Lorenzo (FI) - www.elidentgroup.it
Tel. +39 055 600545 - Fax +39 055 601069

FR - ELI Largo & ELI Gates

Instruments mécaniques pour le traitement du canal radiculaire

Description

ELI Largo & ELI Gates sont des fraises en acier inoxydable pour les canaux radiculaires.

Indications

A utiliser uniquement dans les cabinets dentaires ou dans les hôpitaux par du personnel qualifié.

Domaine d'application

Pour l'élargissement des canaux radiculaires.

Mesures

ELI Largo		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	7300920	7300927
n°2 - 0,9	7300921	7300928
n°3 - 1,1	7300922	7300929
n°4 - 1,3	7300923	7300930
n°5 - 1,5	7300924	7300931
n°6 - 1,7	7300925	7300932
Ass. n°1 - 6	7300926	7300933

ELI Gates		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	7300940	7300947
n°2 - 0,7	7300941	7300948
n°3 - 0,9	7300942	7300949
n°4 - 1,5	7300943	7300950
n°5 - 1,3	7300944	7300951
n°6 - 1,5	7300945	7300952
Ass. n°1 - 6	7300946	7300953

Conditionnement

Dispositif non stérile sous blister de 6 pièces (assorties ou de tailles individuelles).

Procédure recommandée

Protocole opératoire:

- Utiliser dans n'importe quelle pièce à main à angle droit pour élargir la partie coronaire du canal pour l'élimination massive de la structure.
- Pendant la séquence endodontique, irriguer à plusieurs reprises avec de l'hypochlorite et de l'E.D.T.A. pour éliminer tous les tissus nécrotiques et les composants organiques de la boue dentinaire.

Stockage

Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe.

Précautions d'emploi

Avant utilisation, il est recommandé de vérifier avec les patients s'il n'y a pas d'allergie aux matières premières.

Il est recommandé de toujours utiliser des gants chirurgicaux pour se protéger contre la contamination bactérienne. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une infection croisée.


Avertissements

- Dispositif à usage unique, la réutilisation n'est pas recommandée pour limiter les problèmes d'infection croisée et/ou de rupture.
- Ne pas utiliser le blister s'il est ouvert ou endommagé.
- Ne jamais forcer l'instrument dans le canal.
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée.
- Vous devez signaler au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre tout incident grave lié au dispositif médical que nous avons fourni.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité allergique connue aux matières premières.

Symboles

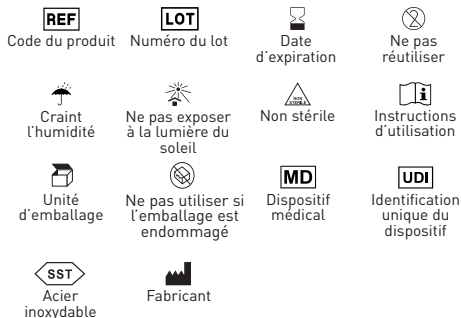

Garantie

Dental World remplacera le produit s'il s'avère défectueux.

Dental World n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct ou consécutif, résultant de l'utilisation négligente ou de l'incapacité d'utiliser le produit décrit. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à son utilisation. L'utilisateur assume la responsabilité de l'utilisation négligente.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Eli-Dent Group S.p.A.
Via Guido Rossa, 24 A/B/C - 50032
Borgo San Lorenzo (FI) - www.elidentgroup.it
Tel. +39 055 600545 - Fax +39 055 601069