

IT - Future Largo & Future Gates

Strumenti canalari meccanici

Descrizione

Future Largo & Future Gates sono frese in acciaio inox per canali radicolari.

Indicazioni

Da utilizzare solo in studio odontoiatrico o in ambito ospedaliero da personale qualificato.

Campo di applicazione

Per l'allargamento dei canali radicolari.

Misure

Future Largo		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	166910015S	166910022S
n°2 - 0,9	166910016S	166910023S
n°3 - 1,1	166910017S	166910024S
n°4 - 1,3	166910018S	166910025S
n°5 - 1,5	166910019S	166910026S
n°6 - 1,7	166910020S	166910027S
Ass. n°1 - 6	166910021S	166910028S

Future Gates		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	166910001S	166910008S
n°2 - 0,7	166910002S	166910009S
n°3 - 0,9	166910003S	166910010S
n°4 - 1,5	166910004S	166910011S
n°5 - 1,3	166910005S	166910012S
n°6 - 1,5	166910006S	166910013S
Ass. n°1 - 6	166910007S	166910014S

Confezionamento

Dispositivo sterile in blister da 6 pezzi (assortiti o singole misure).

Procedura raccomandata

Protocollo operativo:

- Utilizzare in qualsiasi manipolo ad angolo retto per allargare la porzione coronale del canale per la rimozione massiva della struttura.
- Durante la sequenza endodontica, irrigare ripetutamente con ipoclorito e E.D.T.A. al fine di eliminare tutto il tessuto necrotico e la componente organica del fango dentinale.

Conservazione

Il blister deve essere aperto solo al momento dell'intervento e in condizioni di asepsi controllata. Conservare a temperatura ambiente, al riparo da umidità e lontano da fonti di luce diretta.

Precauzioni

Prima dell'uso, si raccomanda di verificare con i pazienti l'eventuale allergia alle materie prime.

Si raccomanda di utilizzare sempre guanti chirurgici per la protezione individuale da contaminazione batterica. La mancata osservanza di questa regola può comportare infezioni crociate.

Avvertenze

- Dispositivo monouso, non è consigliato il riutilizzo per limitare i problemi legati alle infezioni crociate e/o alle rotture.
- Non utilizzare il blister se aperto o danneggiato.
- Qualora la confezione presentasse segni di manomissione o danneggiamenti a fronte del trasporto o di qualsiasi altra natura, si vieta l'utilizzo degli strumenti contenuti in quanto potrebbero aver perso la sterilità.
- Non forzare mai lo strumento nel canale.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

Non utilizzare in pazienti con sensibilità allergica nota alle materie prime.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Distribuito da:

EN - Future Largo & Future Gates

Mechanical root canal instruments

Description

Future Largo & Future Gates are stainless steel burs for root canals.

Indications

Only to be used in dental practices or in hospitals by qualified personnel.

Field of application

For enlarging root canals.

Measures

Future Largo		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	166910015S	166910022S
n°2 - 0,9	166910016S	166910023S
n°3 - 1,1	166910017S	166910024S
n°4 - 1,3	166910018S	166910025S
n°5 - 1,5	166910019S	166910026S
n°6 - 1,7	166910020S	166910027S
Ass. n°1 - 6	166910021S	166910028S

Future Gates		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	166910001S	166910008S
n°2 - 0,7	166910002S	166910009S
n°3 - 0,9	166910003S	166910010S
n°4 - 1,5	166910004S	166910011S
n°5 - 1,3	166910005S	166910012S
n°6 - 1,5	166910006S	166910013S
Ass. n°1 - 6	166910007S	166910014S

Packaging

Sterile device in blister pack of 6 pieces (assorted or individual sizes).

Recommended procedure

Operating protocol:

- Use in any right angle handpiece to widen the coronal portion of the canal for the massive removal of structure.
- During the endodontic sequence, repeatedly irrigate with hypochlorite and E.D.T.A. to remove all necrotic tissue and the organic component of the dental slurry.

Storage

The blister should only be opened at the time of surgery and under controlled aseptic conditions. Store at room temperature, away from moisture and direct light.

Precautions

Before use, it is recommended to check with patients for any allergy to raw materials.

It is recommended to always use surgical gloves for personal protection against bacterial contamination. Failure to do so may result in cross-infection.

Warnings

- Single-use device, re-use is not recommended to limit problems with cross-infection and/or breakage.
- Do not use the blister if opened or damaged.
- If the package shows signs of tampering or damage due to transport or any other nature, the instruments contained therein may not be used as they may have lost sterility.
- Never force the instrument into the canal.
- Do not use after the indicated expiry date.
- You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device we have supplied to the manufacturer and to the competent authority in your Member State.

Contraindications

Do not use in patients with known allergic sensitivity to raw materials.

Symbols



Product code



Lot number



Expiry date



Do not reuse



Keep dry



Keep away from sunlight



Sterile single barrier system



Sterilised by irradiation



IFU



Packing unit



Do not use if packaging is damaged



Medical device



Unique Device Identification



Stainless Steel



Manufacture

Warranty

Dental World shall replace the product if it proves to be defective.

Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, resulting from careless use or inability to use the product described. Before use, it is the user's responsibility to determine the appropriateness of the product for its use. The user assumes responsibility for use careless use.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it



Distributed by:

FR - Future Largo & Future Gates

Instruments mécaniques pour le traitement du canal radiculaire

Description

Future Largo & Future Gates sont des fraises en acier inoxydable pour les canaux radiculaires.

Indications

A utiliser uniquement dans les cabinets dentaires ou dans les hôpitaux par du personnel qualifié.

Domaine d'application

Pour l'élargissement des canaux radiculaires.

Mesures

Future Largo		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	166910015S	166910022S
n°2 - 0,9	166910016S	166910023S
n°3 - 1,1	166910017S	166910024S
n°4 - 1,3	166910018S	166910025S
n°5 - 1,5	166910019S	166910026S
n°6 - 1,7	166910020S	166910027S
Ass. n°1 - 6	166910021S	166910028S

Future Gates		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	166910001S	166910008S
n°2 - 0,7	166910002S	166910009S
n°3 - 0,9	166910003S	166910010S
n°4 - 1,5	166910004S	166910011S
n°5 - 1,3	166910005S	166910012S
n°6 - 1,5	166910006S	166910013S
Ass. n°1 - 6	166910007S	166910014S

Conditionnement

Dispositif stérile sous blister de 6 pièces (assorties ou de tailles individuelles).

Procédure recommandée

Protocole opératoire:

- Utiliser dans n'importe quelle pièce à main à angle droit pour élargir la partie coronaire du canal pour l'élimination massive de la structure.
- Pendant la séquence endodontique, irriguer à plusieurs reprises avec de l'hypochlorite et de l'E.D.T.A. pour éliminer tous les tissus nécrotiques et les composants organiques de la boue dentinaire.

Stockage

Le blister ne doit être ouvert qu'au moment de l'intervention chirurgicale et dans des conditions d'asepsie contrôlées. Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe.

Précautions d'emploi

Avant utilisation, il est recommandé de vérifier avec

les patients s'il n'y a pas d'allergie aux matières premières.

Il est recommandé de toujours utiliser des gants chirurgicaux pour se protéger contre la contamination bactérienne. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une infection croisée.


Avertissements

- Dispositif à usage unique, la réutilisation n'est pas recommandée pour limiter les problèmes d'infection croisée et/ou de rupture.
- Ne pas utiliser le blister s'il est ouvert ou endommagé.
- Si l'emballage présente des signes d'altération ou des dommages dus au transport ou à toute autre nature, les instruments qu'il contient ne peuvent pas être utilisés car ils peuvent avoir perdu leur stérilité.
- Ne jamais forcer l'instrument dans le canal.
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée.
- Vous devez signaler au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre tout incident grave lié au dispositif médical que nous avons fourni.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité allergique connue aux matières premières.

Symboles

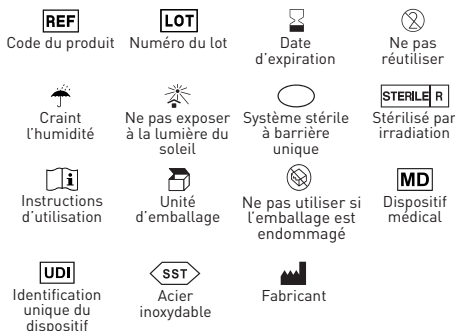

Garantie

Dental World remplacera le produit s'il s'avère défectueux.

Dental World n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct ou consécutif, résultant de l'utilisation négligente ou de l'incapacité d'utiliser le produit décrit. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à son utilisation. L'utilisateur assume la responsabilité de l'utilisation négligente.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Distribué par: