

Barbed broach

Strumenti canalari manuali

Descrizione

Barbed broach (tiranervi) sono strumenti in acciaio inox utilizzati per l'estirpazione della polpa vitale dal canale radicolare.

Indicazioni

Da utilizzare solo in studio odontoiatrico o in ambito ospedaliero da personale qualificato.

Campo di applicazione

Per estrarre la polpa del canale radicolare del dente da riparare. Consigliato per canali ampi e dritti.

Misure

BARBED BROACH	
Size	Code
● xxxxf-0	144516600
○ xxxf-1	144516610
● xxf-2	144516620
● xf-3	144516630
● f-4	144516640
● m-5	144516650
● c-6	144516660
Assorted	144516670

Confezionamento

- Blister da 10 pz.
- Box da 15 blisters

Procedura raccomandata

Introdurre il tiranervi nel canale radicolare ed eseguire un movimento rotatorio dello strumento di 180° - 360° fino ad estirpare i tessuti pulpari che rimarranno avvolti sullo strumento.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di luce diretta.

Precauzioni

- Gli strumenti sono consigliati monouso.
- Se utilizzati ripetutamente potrebbero non essere efficienti e/o causare danni/inconvenienti

al paziente.

- Non utilizzare il blister se aperto o danneggiato.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it



Barbed broach

Manual canal instruments

Description

Barbed broach are tools made of stainless steel used for the extraction of the vital pulp from the root canal.

Indications

To be used only in dental clinics or hospitals by qualified personnel.

Application field

For extraction of the pulp from the root canal of the tooth to be repaired. Recommended for wide and straight canals.

Measures

BARBED BROACH	
Size	Code
● xxxxf-0	144516600
○ xxxf-1	144516610
● xxf-2	144516620
● xf-3	144516630
● f-4	144516640
● m-5	144516650
● c-6	144516660
Assorted	144516670

Packaging

- Blister 10 pcs
- Bag 15 blisters

Recommended procedure

Insert the barbed broach into the root canal and rotate the instruments 180° – 360° until pulp tissues are removed so they will remain wrapped around the instrument.

Storage


Store the product at room temperature away from direct light.

Cautions

- Instruments are disposable.
- Repeated use may not be effective and/or cause damage/ inconvenience to the patient.

- Do not use the blister if opened or damaged.

Symbols

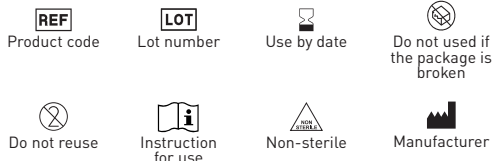

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

 0476