

Pro Shaper Remove

Strumenti canalari meccanici

Descrizione

Gli strumenti canalari Pro Shaper Remove sono strumenti realizzati in Ni-Ti indicati per la rimozione dei materiali per otturazione come guttaperca, cementi o altro materiale da riempimento, prima della rimodellazione del canale radicolare. Gli strumenti sono tre, ognuno per ogni terzo coronale.

Indicazioni

Da utilizzare solo in studio odontoiatrico o in ambito ospedaliero.

Campo di applicazione

Sagomatura e pulizia dei canali radicolari.

Misure

PRO SHAPER REMOVE							
	Ø	%	N/cm	RPM	16 mm	18 mm	22 mm
○ D1	30	9	2,5	150-300	144900120	-	-
○ D2	25	8	2,5	150-300	-	144900131	-
○ D3	20	7	2,5	150-300	-	-	144900142
D1-D3	--	--	--	--	144900123		

Confezionamento

Blister da 6 pezzi (assortiti o singole misure).

Procedura raccomandata

Protocollo operativo:

- Isolare il campo operatorio con diga di gomma.
- Introdurre nella camera pulpare poche gocce di soluzione per il rammollimento chimico della guttaperca o altro materiale da rimuovere.
- Con l'aiuto dello strumento canalare D1 rimuovere il materiale nel terzo coronale.
- Con lo strumento D2 rimuovere il materiale nel terzo medio.
- Utilizzare D3 per la rimozione nel terzo apicale.
- Rimuovere regolarmente l'applicazione e risciacquare alternativamente con ipoclorito di sodio (Endo Clor).

Durante tutta la sequenza endodontica, irrigare ripetutamente con ipoclorito (Endo Clor) e E.D.T.A. (Canal Prep) al fine di eliminare tutto il tessuto necrotico e la componente organica del fango dentinale.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di luce diretta.

Precauzioni

- Gli strumenti sono consigliati monouso.
- Se utilizzati ripetutamente potrebbero non essere efficienti e/o causare inconvenienti.
- Non utilizzare il blister se aperto o danneggiato.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it



REV.1_06-2022

Pro Shaper Remove

Mechanical canal instruments

Description

Pro Shaper Remove canal instrument are tools made of Ni-Ti recommended for the removal of filling materials such as gutta-percha, cements or other filling material, before the re-modelling of the root canal. There are three instruments, each for every third coronal.

Indications

To be used only in dental clinics or in hospitals.

Application field

Shaping and cleaning of root canal.

Measures

PRO SHAPER REMOVE							
	∅	%	N/cm	RPM	16 mm	18 mm	22 mm
○ D1	30	9	2,5	150-300	144900120	-	-
○ D2	25	8	2,5	150-300	-	144900131	-
○ D3	20	7	2,5	150-300	-	-	144900142
D1-D3	--	--	--	--	144900123		

Packaging

6 pcs (assorted or in individual sizes).

Recommended procedure

Operative protocol:

- Isolate the operating field with a dental dam.
- Introduce into the pulp chamber a few drops of solution for chemical softening of gutta-perca or other material to be removed.
- With the help of canal instrument D1 remove the material in the third coronal.
- With the D2 instrument remove the material in the third medium.
- Use D3 for removal in the third apical.
- Regularly remove the application and rinse alternatively with sodium hypochlorite (Endo Clor).

Throughout the endodontic sequence, irrigate repeatedly with hypochlorite (Endo Clor) and E. D. T. A. (Canal Prep) in order to remove all

necrotic tissue and organic component of smear layer.


Storage

Store at room temperature, away from direct light sources.

Preventive measures

- The instruments are recommended for single use.
- If used repeatedly they may not be efficient and/or cause inconvenience.
- Do not use the blister if opened or damaged.

Symbols

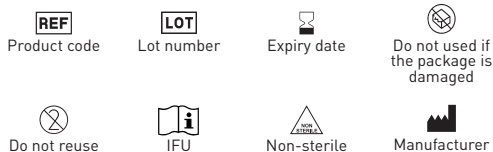

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it