

Carta per articolazioni

Foglietti monouso

Descrizione

La carta per articolazioni è una carta dentale utilizzata per evidenziare i contatti di occlusione creando dei segni sulle superfici dei denti corrispondenti. La conoscenza dell'occlusione e dei contatti occlusali è indispensabile per gli odontoiatri per eseguire con successo dei trattamenti restaurativi. Il tempo di contatto fra la carta e la superficie dentale equivale a pochi morsi, l'inchiostro di articolazione disponibile nelle colorazioni rosso e blu, fornirà una valutazione bidimensionale dell'occlusione dentale che aiuterà l'operatore ad identificare i segni di instabilità occlusale.

Tipologie / Micron

- Carta per articolazioni - **Rossa** - 40 µm (sottile)
- Carta per articolazioni - **Rossa** - 100 µm (media)
- Carta per articolazioni - **Blu** - 50 µm (sottile)
- Carta per articolazioni - **Blu** - 100 µm (media)
- Carta per articolazioni - **Rossa / Blu** - 100 µm (media)

Modalità d'uso

- Prelevare una striscia di carta dal blocchetto, afferrandola dal lembo di carta non colorato.
- Posizionare la carta per articolazione in corrispondenza dell'arcata dentale manualmente o tramite un'apposita pinza.
- Chiedere al paziente di serrare l'articolazione (mordere) e picchiettare i denti sulla carta fino ad avere un sufficiente trasferimento di colore.


Conservazione

- Non conservare ad elevata temperatura.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre a luce diretta e fonti di calore.

Precauzioni

- Prodotto per solo uso dentale.
- Deve essere utilizzato solo da professionisti che osservino la procedura e le indicazioni.
- Tenere lontano da utenti non professionisti.
- Evitare il contatto del prodotto con mucose, occhi e pelle. Se si verifica un contatto accidentale, sciacquare immediatamente con abbondanti quantità di acqua.
- Non ingerire.
- Smaltire secondo la normativa vigente nel proprio comune.

Simboli

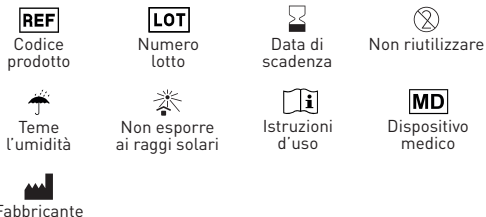

Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso. Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Articulating paper

Single use sheets

Description

Articulating paper is a dental paper used to highlight occlusion contacts by creating marks on the surfaces of the corresponding teeth. Knowledge of occlusion and occlusal contacts is essential for dentists to successfully perform restorative treatments. The contact time between the paper and the tooth surface is equivalent to a few bites; the articulating ink, available in red and blue colors, will provide a two-dimensional assessment of dental occlusion that will help the doctor identify signs of occlusal instability.

Tipologie / Micron

- Articulating paper - **Red** - 40 μm (thin)
- Articulating paper - **Red** - 100 μm (medium)
- Articulating paper - **Blue** - 50 μm (thin)
- Articulating paper - **Blue** - 100 μm (medium)
- Articulating paper - **Red / Blue** - 100 μm (medium)

Method of use

- Withdraw a strip of paper from the pad, grasping it by the uncolored paper flap.
- Place the articulating paper at the dental arch manually or by a special forceps.
- Ask the patient to bite and tap the teeth on the paper until there is sufficient color transfer.

Storage

- Do not store at high temperature.
- Store in a cool, dry place.
- Do not expose to direct light and heat sources.

Precautions

- Product for dental use only.
- Should be used only by professionals who observe the procedure and directions.
- Keep away from non-professional users.
- Avoid contact of product with mucous membranes, eyes and skin. If accidental contact

occurs, rinse immediately with copious amounts of water.

- Do not ingest.
- Dispose according to current regulations in your town.

Symbols



Product code



Lot number



Expiry date



Do not reuse



Keep dry



Keep away from sunlight



IFU



Medical device



Manufacturer

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

