

Ortho Control

Dispositivi preformati - Controllo - Funzionalità

MADE IN ITALY



Gli Ortho Control sono dei dispositivi preformati per l'ortodonzia intercettiva. Essi vengono indicati per pazienti in età evolutiva dagli 8 ai 12 anni, per guidare l'eruzione ed il posizionamento dei canini e dei premolari, restituendo un rapporto occlusale idoneo, e nel contempo allineando i denti frontali garantendo un overbite/overjet ideale.

Gli Ortho Control possono essere usati anche in età adulta, ma si otterrà solo un movimento dentario e non scheletrico.

Inoltre possono essere impiegati come regolatori miofunzionali riequilibrando le forze muscolari.

FORMA A

Indicata in pazienti di età compresa tra i 5 e i 7 anni.

FORMA B

Indicata in pazienti di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, e per adulti.

Indicazioni:

- Affollamento
- Overjet
- Over-bite
- Malocclusioni di I e II classe
- Curva di spee accentuata
- Ipertonicità delle labbra
- Open bite
- Rotazioni
- Cross bite Premolari
- Coordina le Arcate

Vantaggi:

- Preformati per un veloce piazzamento
- Maggiore efficacia nel trattamento
- Risparmio di tempo
- Costi ridotti
- Procedure più spedite
- Sterilizzabile
- Comfort nell'utilizzo

Procedure per manutenzione e riutilizzo:

- Dopo l'utilizzo, risciacquare accuratamente il prodotto sotto acqua corrente utilizzando uno spazzolino e successivamente posizionarlo nel suo apposito contenitore.
- Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo, in modo tale da verificare la totale integrità dello stesso.
- In caso di rotture o danni al prodotto, rivolgersi immediatamente all'odontoiatra.

Simboli



Codice prodotto



Numero lotto



Data di scadenza



Attenzione



Non sterile



Non esporre a luci



Teme l'umidità



Istruzioni d'uso



Fabbricante

Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

Dental World S.r.l.


Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617


e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it




Nicchie per forze estrusive e come guide eruttive per molari

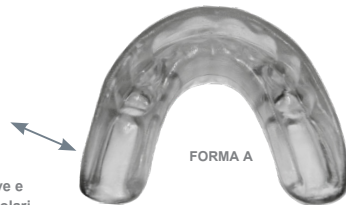

FORMA A

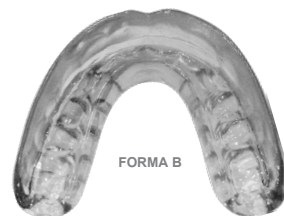

FORMA B

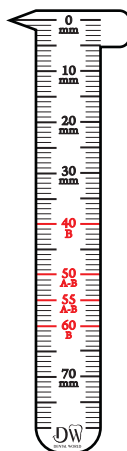

Metodo di misurazione

Ortho Control Kit

REF AB010

Ortho Control Ricambio

Forma A

REF AA050

REF AA055

Forma B

REF BB040

REF BB050

REF BB055

REF BB060

Ortho Control

Preformed deviced - Control - Functionality

MADE IN ITALY



Ortho Control are preformed appliances for intercepting orthodontics. They are recommended for patients from 8 to 12 years old, to guide erupting canines and bicusps and to align front teeth to solve overjet or overbite problems. Ortho Control can be also employed in adults, providing that malformation is dental and not skeletal. Moreover, they can be used as miofunctional regulators rebalancing muscular forces.

SHAPE A

Is recommended for patients from 5 to 7 years old.

SHAPE B

Is recommended for patients from 8 to years old and for the adults.

Recommended for:

- Crowding
- Overjet
- Over-bite
- I and II class malocclusion
- Accentuated spee's curve
- Hypertonic lips
- Open bite
- Rotation
- Bicuspid cross bite
- Arcate coordination

Benefits:

- Preformed for a quick placement
- Highest treatment efficacy
- Time saving
- Cost reduction
- Quick procedures
- Sterilizable
- Comfortable use

Procedures for maintenance and use:

- After use, thoroughly rinse the product under flowing water using a brush. Then, put it back in its container.
- Check the product before each use to ensure its complete integrity.
- In case of breakage or damage to the product, immediately contact your dentist.


Symbols




Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective.

Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

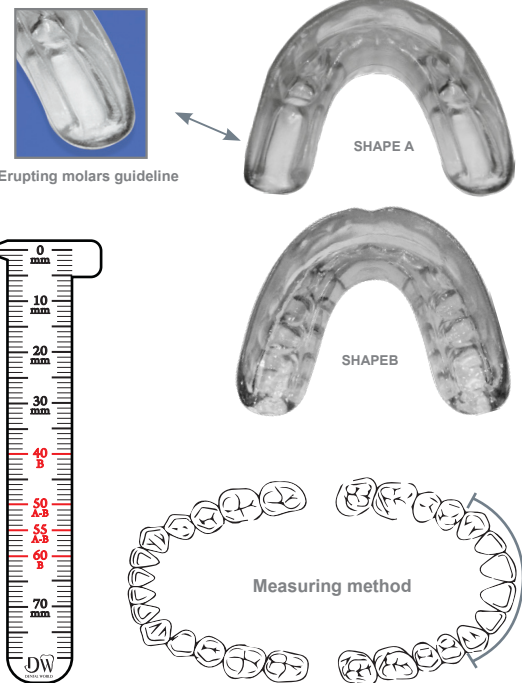

Ortho Control Kit
REF AB010

Ortho Control Refill

Shape A

REF AA050
REF AA055

Shape B

REF BB040 REF BB055
REF BB050 REF BB060