

# Linea Eclipse

## Molle ortodontiche

### Descrizione

Le molle ortodontiche sono utilizzate per aprire e mantenere gli spazi dentali. Le molle che contengono occhielli in acciaio consentono il facile posizionamento della molla. A seconda del tipo di molla può essere applicata una forza medio-leggera.

### Indicazioni d'uso

Le molle ortodontiche sono impiegate per il movimento dei denti tramite forze di trazione e pressione.

### Procedura raccomandata

- Tagliare la molla alla lunghezza desiderata ed applicarla sull'arco. Comprimerla fino a chiudere le spire. Applicare il prodotto nell'interstizio del bracket o tra uno stop sull'arco e il bracket.
- Per le molle con occhielli agganciare la stessa al gancio dei bracket e dei tubi buccali o agli stop applicati sull'arco. Non tendere eccessivamente la molla oltre la lunghezza consentita per non farle perdere la forza antagonista.

### Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- Comunicare al paziente di mangiare e pulire i denti con attenzione per non rischiare che le molle si stacchino.
- Non lasciare le molle attivate illimitatamente o per un periodo eccessivamente prolungato per evitare che possano rompersi all'interno della bocca.
- In caso di reazione allergica, rimuovere immediatamente il dispositivo.
- Il prodotto contiene nichel pertanto in caso di sospetta o accertata allergia / sensibilità del paziente non utilizzare in alcun modo.
- Rispettare le disposizioni nazionali sullo smaltimento.

**È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.**

### Controindicazioni

- Insufficiente igiene orale del paziente.
- Allergie note nei confronti di uno dei componenti del prodotto.
- Malattie generali/di base che non permettono alcun trattamento ortodontico.

### Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Non disperdere nell'ambiente.

### Simboli



### Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: [info@dental-world.it](mailto:info@dental-world.it) / web: [www.dental-world.it](http://www.dental-world.it)

# Eclipse line

## Orthodontic springs

### Description

Orthodontic springs are used to open and maintain dental spaces. Springs that contain steel eyelets allow easy positioning of the spring. Depending on the type of spring, a medium to light force can be applied.

### Indications for use

Orthodontic springs are used to move teeth by tensile and pressure forces.

### Recommended procedure

- Cut the spring to the desired length and apply it to the bow. Compress the spring until the coils are closed. Apply it in the gap of the bracket or between a stop on the arch and the bracket.
- For springs with eyelets, hook it onto the hook of the brackets and buccal tubes or the stops applied on the arch. Do not overstretch the spring beyond the allowed length so that it does not lose its antagonistic force.

### Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- Tell the patient to eat and clean teeth carefully so as not to risk the springs coming off.
- Do not leave the springs activated indefinitely or for an excessively long period to prevent them from breaking off inside the mouth.
- In case of allergic reaction, remove the device immediately.
- The product contains nickel so in case of suspected or established allergy/sensitivity of patient do not use in any way.
- Comply with national disposal regulations.

**You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.**


### Controindicazioni

- Insufficiente igiene orale del paziente.
- Allergie note nei confronti di uno dei componenti del prodotto.
- Malattie generali/di base che non permettono alcun trattamento ortodontico.

### Contraindications


- Store at room temperature.
- Store properly in its packaging.
- Do not disperse in the environment.

### Symbols

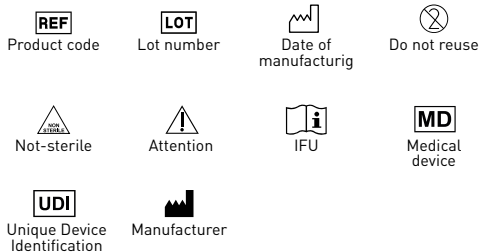

### Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.  
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)  
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617  
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it