

Linea Mimetic ed Eclipse

Bracket ortodontici

Descrizione

Il bracket è un dispositivo destinato all'uso nel trattamento ortodontico. Il dispositivo è apposto su un dente in modo che sullo stesso possa essere esercitata una pressione, trasmessa attraverso un filo ortodontico, per migliorare la posizione dell'elemento dentario.

Indicazioni d'uso

I bracket possono essere utilizzati con i tradizionali metodi di bondaggio diretto o indiretto.

Per le procedure di bondaggio, seguire le raccomandazioni del produttore dell'adesivo.

Procedura raccomandata

Assicurarsi che il filo ortodontico sia correttamente e completamente posizionato all'interno dello slot. Per prevenire la frattura dei bracket evitare il contatto diretto degli attacchi con gli strumenti per il taglio delle legature.

Dato che il bracket può causare irritazione, si consiglia un controllo approfondito da parte dello specialista.

La rimozione dei bracket può causare danni allo smalto, pertanto occorre prestare particolare attenzione.

A seguito di rimozione del bracket, rimuovere lo strato di adesivo sullo smalto con gli appositi strumenti.

Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Per il bondaggio del bracket si consiglia di utilizzare sulla base un adesivo fotopolimerizzabile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- In caso di reazione allergica, rimuovere immediatamente l'apparecchio ortodontico.
- Alcune serie di bracket contengono nickel, pertanto in caso di sospetta o accertata allergia / sensibilità del paziente non utilizzare in alcun modo.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

Fumo pesante, abuso di tabacco e alcol, malattie sistemiche del sangue, diabete incontrollato

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Non disperdere nell'ambiente.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Linea Mimetic ed Eclipse

Orthodontic Bracket

Description

The bracket is a device intended for use in orthodontic treatment. The device is affixed to a tooth so that pressure, transmitted through an orthodontic wire, can be exerted on it to improve the position of the tooth.

Indications for use

Brackets can be used with traditional direct or indirect bonding methods.

For bonding procedures, follow the adhesive manufacturer's recommendations.

Recommended procedure

Ensure that the orthodontic wire is correctly and completely positioned within the slot.

To prevent fracture of the brackets, avoid direct contact of the brackets with ligature cutting instruments.

Since the bracket can cause irritation, thorough inspection by the specialist is recommended.

Removal of brackets can cause damage to enamel, so special care should be taken.

After removal of the bracket, remove the adhesive layer on the enamel with the appropriate tools.

Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- A light-cured adhesive is recommended for bonding the bracket to the base.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- In case of an allergic reaction, remove the orthodontic retainer immediately.
- Some bracket series contain nickel, so in case of suspected or established allergy/sensitivity of the patient, do not use in any way.

You must report any serious incidents occurring

in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.


Contraindications

Heavy smoke, tobacco and alcohol abuse, systemic blood diseases, uncontrolled diabetes.

Storage


- Store at room temperature.
- Store properly in their own packaging.
- Do not disperse in the environment.

Symbols

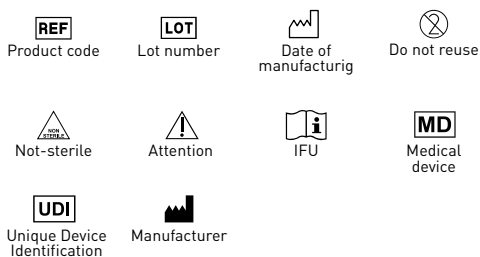

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it