

Linea Eclipse

Bande ortodontiche e accessori

Descrizione

La banda molare è un anello metallico che circonda il molare, ad essa viene solitamente saldato un tubo attraverso il quale passa l'arco necessario al trattamento.

Gli Sheaths linguali sono attacchi realizzati per montare barre palatali, Quad Helix o altri apparecchi removibili.

Indicazioni d'uso

L'obiettivo della banda è cementare i molari per esercitare sopra di essi forze ortodontiche.

Procedura raccomandata

1. Le bande sono unite al tubo buccale o ad altri attachment tramite saldatura in modo da garantire che questi non si stacchino dalla banda durante il trattamento.
2. Accertarsi che gli attachment siano posizionati esattamente e che le saldature siano eseguite correttamente.
3. Utilizzare un cemento ortodontico per bande o adesivo, osservando le istruzioni del produttore.
4. Eliminare il cemento in eccesso intorno alla banda e dalla superficie occlusale del dente. A fine cementazione è possibile fissare archi, elastici o altri ausili negli o sugli attachment saldati.
5. Se si utilizza uno spingibande, usarlo con attenzione per evitare lo scivolamento della banda e quindi lesioni alla mucosa del paziente.

Avvertenze

- Il prodotto deve essere utilizzato da ortodontisti professionisti qualificati.
- Solo per uso dentale.
- Non riutilizzare il prodotto.
- Prodotto non sterile.
- Istruire i pazienti a non masticare o mordere sostanze dure come caramelle dure, ghiaccio, carote, ecc.
- In caso di reazione allergica, rimuovere immediatamente l'apparecchio ortodontico.
- Il prodotto contiene nichel pertanto in caso di sospetta o accertata allergia / sensibilità del paziente non utilizzare in alcun modo.

- Rispettare le disposizioni nazionali sullo smaltimento.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

- Insufficiente igiene orale del paziente.
- Allergie note nei confronti di uno dei componenti del prodotto.
- Malattie generali/di base che non permettono alcun trattamento ortodontico.

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Conservare correttamente nella propria confezione.
- Non disperdere nell'ambiente.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Eclipse line

Orthodontic bands and accessories

Description

The molar band is a metal ring surrounding the molar; a tube is usually welded to it through which the arc necessary for treatment passes.

Lingual Sheaths are attachments made to mount palatal bars, Quad Helix or other removable appliances.

Indications for use

The objective of the band is to cement molars to exert orthodontic forces over them.

Recommended procedure

1. Bands are joined to the buccal tube or other attachments by welding to ensure that they do not come off the band during treatment.
2. Make sure that the attachments are positioned exactly and that the welds are done correctly.
3. Use an orthodontic band cement or adhesive, following the manufacturer's instructions.
4. Remove excess cement around the band and from the occlusal surface of the tooth. After cementation is complete, you can attach bows, elastics or other aids in or on the welded attachments.
5. If a band pusher is used, use it carefully to avoid slipping of the band and thus injury to the patient's mucosa.

Warnings

- The product should be used by qualified professional orthodontists.
- For dental use only.
- Do not reuse the product.
- Non sterile product.
- Instruct patients not to chew or bite hard substances such as hard candies, ice, carrots, etc.
- In case of an allergic reaction, remove the orthodontic retainer immediately.
- The product contains nickel so in case of suspected or established allergy/sensitivity of the patient do not use in any way.
- Comply with national disposal regulations.

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the

manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.


Contraindications

- Inadequate oral hygiene of the patient.
- Known allergies to any of the components of the product.
- General/basic illnesses that do not permit any orthodontic treatment.

Storage


- Store at room temperature.
- Store properly in their own packaging.
- Do not disperse in the environment.

Symbols

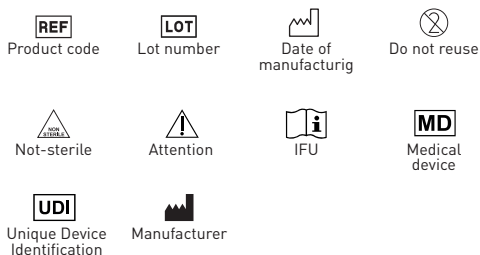

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it