

Ortho Control - IT

Dispositivi preformati - Controllo - Funzionalità

Gli Ortho Control sono dei dispositivi preformati per l'ortodonzia intercettiva. Essi vengono indicati per pazienti in età evolutiva dagli 8 ai 12 anni, per guidare l'eruzione ed il posizionamento dei canini e dei premolari, restituendo un rapporto oclusale idoneo, e nel contempo allineando i denti frontali garantendo un overbite/overjet ideale.

Gli Ortho Control possono essere usati anche in età adulta, ma si otterrà solo un movimento dentario e non scheletrico.

Inoltre possono essere impiegati come regolatori miofunzionali riequilibrando le forze muscolari.

FORMA A

Indicata in pazienti di età compresa tra i 5 e i 7 anni.

FORMA B

Indicata in pazienti di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, e per adulti.

Indicazioni:

- Affollamento
- Overjet
- Over-bite
- Malocclusioni di I e II classe
- Curva di spee accentuata
- Ipertonicità delle labbra
- Open bite
- Rotazioni
- Cross bite Premolari
- Coordina le Arcate

Vantaggi:

- Preformati per un veloce piazzamento
- Maggiore efficacia nel trattamento
- Risparmio di tempo
- Costi ridotti
- Procedure più spedite
- Sterilizzabile
- Comfort nell'utilizzo

Procedure per manutenzione e riutilizzo:

- Dopo l'utilizzo, risciacquare accuratamente il prodotto sotto acqua corrente utilizzando uno spazzolino e successivamente posizionarlo nel suo apposito contenitore.
- Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo, in modo tale da verificare la totale integrità dello stesso.
- In caso di rotture o danni al prodotto, rivolgersi immediatamente all'odontoiatra.

Avvertenze

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.


Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

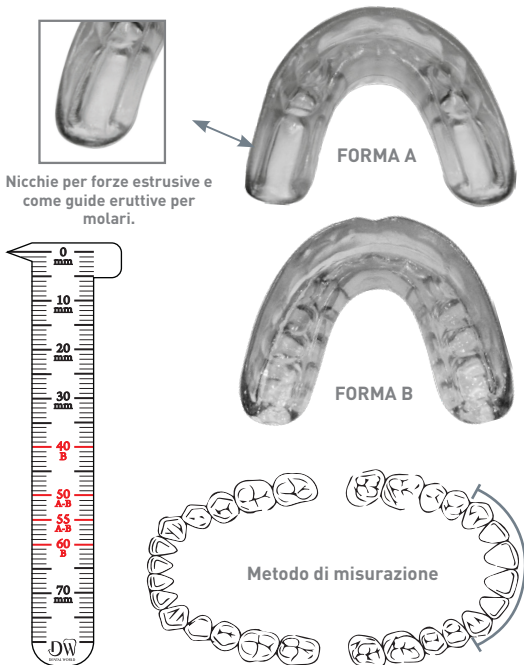

Ortho Control - EN

Preformed deviced - Control - Functionality

Ortho Control are preformed appliances for intercepting orthodontics. They are recommended for patients from 8 to 12 years old, to guide erupting canines and bicusps and to align front teeth to solve overjet or overbite problems. Ortho Control can be also employed in adults, providing that malformation is dental and not skeletal.

Moreover, they can be used as miofunctional regulators rebalancing muscular forces.

SHAPE A

Is recommended for patients from 5 to 7 years old.

SHAPE B

Is recommended for patients from 8 to years old and for the adults.

Recommended for:

- Crowding
- Overjet
- Over-bite
- I and II class malocclusion
- Accentuated spee's curve
- Hypertonic lips
- Open bite
- Rotation
- Bicuspid cross bite
- Arcate coordination

Benefits:

- Preformed for a quick placement
- Highest treatment efficacy
- Time saving
- Cost reduction
- Quick procedures
- Sterilizable
- Comfortable use

Procedures for maintenance and use:

After use, thoroughly rinse the product under flowing water using a brush. Then, put it back in its container.

Check the product before each use to ensure its complete integrity.

In case of breakage or damage to the product, immediately contact your dentist.

Warnings

You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device you supply to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.

Symbols



Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective.


Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

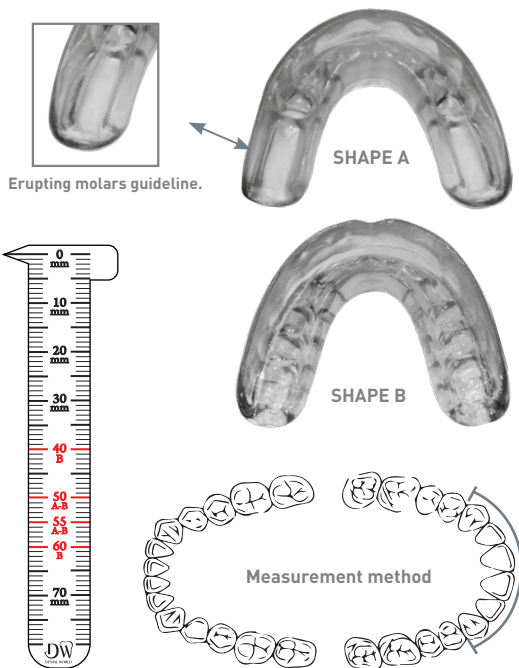

Ortho Control - FR

Dispositif préformé - Contrôle - Fonctionnalité

Ortho Control sont des appareils préformés pour l'orthodontie d'interception. Ils sont recommandés pour les patients âgés de 8 à 12 ans, pour guider l'éruption des canines et des prémolaires et pour aligner les dents de devant afin de résoudre les problèmes d'overjet ou de overbite. Ortho Control peut également être utilisé chez les adultes, à condition que la malformation soit dentaire et non squelettique.

De plus, ils peuvent être utilisés comme régulateurs multifonctionnels pour rééquilibrer les forces musculaires.

FORME A

Est recommandée pour les patients âgés de 5 à 7 ans.

FORME B

Est recommandé pour les patients de 8 à 12 ans et pour les adultes.

Recommandé pour:

- Encombrement
- Surjet
- Sur-occlusion
- Malocclusion de classe I et II
- Courbe de spee accentuée
- Lèvres hypertoniques
- Articulation ouverte
- Rotation
- Articulation croisée bicuspidée
- Coordination de l'arcade

Avantages:

- Préformé pour une mise en place rapide
- Efficacité maximale du traitement
- Gain de temps
- Réduction des coûts
- Procédures rapides
- Stérilisable
- Utilisation confortable

Procédures d'entretien et d'utilisation:

Après utilisation, rincer soigneusement le produit à l'eau courante à l'aide d'une brosse. Ensuite, le remettre dans son emballage. Vérifier le produit avant chaque utilisation pour s'assurer de sa parfaite intégrité. En cas de casse ou de détérioration du produit, contactez immédiatement votre dentiste.

Avertissements

Vous devez signaler au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous vous trouvez tout incident grave lié au dispositif médical que vous fournissez.

Symboles



Code du produit



Numéro du lot



Date d'expiration



Attention



Non stérile



Ne pas exposer à la lumière du soleil



Craint l'humidité



Instructions d'utilisation



Dispositif médical



Identification unique du dispositif



Fabricant

Garantie

Dental World remplacera les produits dont il est prouvé qu'ils sont défectueux.


Dental World n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct ou consécutif, résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit décrit. Avant toute utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage auquel il le destine. L'utilisateur assume tous les risques et toutes les responsabilités y afférents.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

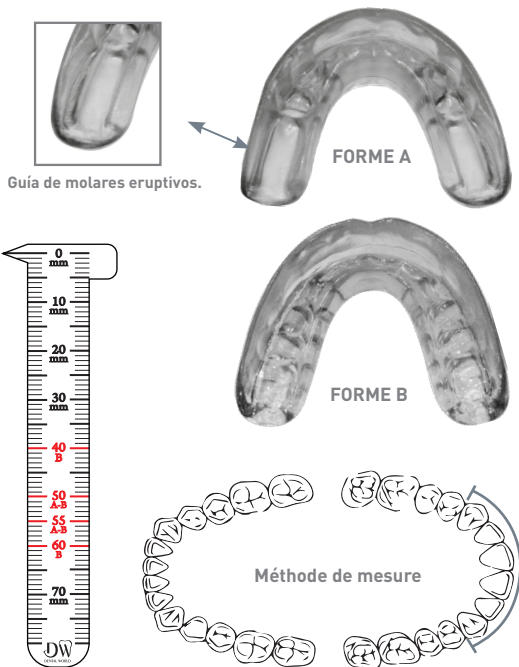

Guía de molares eruptivos.

FORME A

FORME B

Méthode de mesure

Ortho Control - ES

Dispositivo preformado - Control - Funcionalidad

Ortho Control son aparatos preformados para la ortodoncia de intercepción. Se recomiendan en pacientes de 8 a 12 años, para guiar los caninos y premolares en erupción y alinear los dientes anteriores para solucionar problemas de resalte o sobremordida. Ortho Control también puede emplearse en adultos, siempre que la malformación sea dental y no esquelética. Además, pueden utilizarse como reguladores miofuncionales que reequilibran las fuerzas musculares.

FORMA A

Se recomienda para pacientes de 5 a 7 años.

FORMA B

Se recomienda para pacientes de 8 a años y para los adultos.

Recomendado para:

- Apiñamiento
- Sobremordida
- Sobremordida
- Maloclusión de clase I y II
- Curvatura acentuada de la lanza
- Labios hipertónicos
- Mordida abierta
- Rotación
- Mordida cruzada bicúspide
- Coordinación arcada

Ventajas:

- Preformado para una colocación rápida
- Máxima eficacia del tratamiento
- Ahorro de tiempo
- Reducción de costes
- Procedimientos rápidos
- Esterilizable
- Uso cómodo

Procedimientos de mantenimiento y uso:

Después del uso, enjuague bien el producto con agua corriente utilizando un cepillo. A continuación, vuelva a colocarlo en su recipiente. Compruebe el producto antes de cada uso para garantizar su total integridad. En caso de rotura o deterioro del producto, póngase inmediatamente en contacto con su dentista.

Advertencias

Debe informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre de cualquier incidente grave relacionado con el producto sanitario que suministra.


Símbolos




Garantía

Dental World sustituirá el producto si resulta defectuoso.

Dental World no se hace responsable de los daños o pérdidas, directos o indirectos, resultantes de un uso descuidado o de la incapacidad de utilizar el producto descrito. Antes de su uso, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso. El usuario asume la responsabilidad por el uso descuidado.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

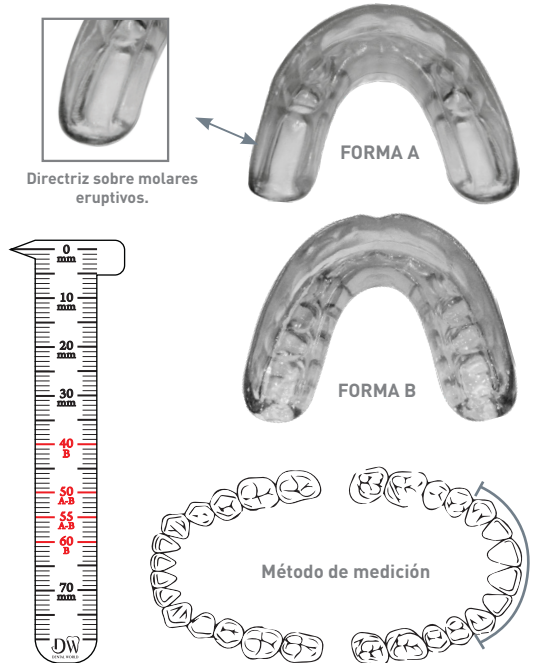

REV.02_03/2025