



LABORATORIO | LABORATORY

OFFICIAL CATALOGUE



INDICE / Index


LABORATORIO / LABORATORY

• ZetaFILL Lab	pag. 2
• Dabliu Lab	pag. 4
• Dabliu Lab A+B	pag. 5
• Duplex Angle 22	pag. 6
• Dabliu Catalyst	pag. 6
• Dabliu Tray LC	pag. 7
• Dabliu Tray	pag. 7
• Ortho Form	pag. 8
• Pomice extra fine	pag. 10
• Dabliu Stone - tipo IV extra duro	pag. 10
• Dabliu Stone - tipo IV per modelli	pag. 10
• Dabliu Stone - tipo III ortodontico	pag. 11
• Dabliu Stone - tipo IV extra duro ortodontico	pag. 11
• Dabliu Stone - tipo III per modelli	pag. 11
• Dabliu Stone - tipo II alabastrino	pag. 12
• Dabliu Stone per articolazioni	pag. 12
• Dabliu Wax - cera	pag. 13
• Dabliu Wax - cera per modellazione bianca	pag. 14
• Dabliu Wax - cera per modellazione normale ed estiva	pag. 14
• Dabliu Wax - cera utility rossa	pag. 15
• Dabliu Wax - cera per bordaggio in bastoncini	pag. 15
• Dabliu Wax - cera per boxaggio in strisce	pag. 16
• Dabliu Wax - cera occlusale preformata	pag. 16
• Dabliu Wax - cera per immersione	pag. 17
• Dabliu Wax - cera per articolazioni 2 mm / 4 mm	pag. 17
• Dabliu Wax - cera per articolazioni bastoncini o ferro di cavallo	pag. 18
• Dabliu Wax - cera collante bastoncini	pag. 19
• Dabliu Wax - cera per modellazione a pezzi	pag. 19
• Dabliu Wax - cera per modellazione semidura	pag. 20
• Dabliu Wax - cera di presentazione	pag. 20
• Dabliu Wax - cera per modellazione dura	pag. 21
• Dabliu Wax - cera cervicale	pag. 21
• Dabliu Wax - cera per fissaggio	pag. 22
• Preformati in cera in blocco	pag. 22
• Fogli in cera lisci e ruvidi per scheletrati	pag. 23
• Ganci profilati in cera per scheletrati	pag. 23
• Reticolati in cera	pag. 24
• Ritenzioni in cera	pag. 24
• Filo di cera in bobina e bastoncini	pag. 25
• Barre linguali di cera mezzo tondo	pag. 26
• Barre linguali di cera calibrata	pag. 26

ZETA FILL LAB - KIT

Composito fotopolimerizzabile per ricostruzioni indirette

Light cured composite for indirect restorations

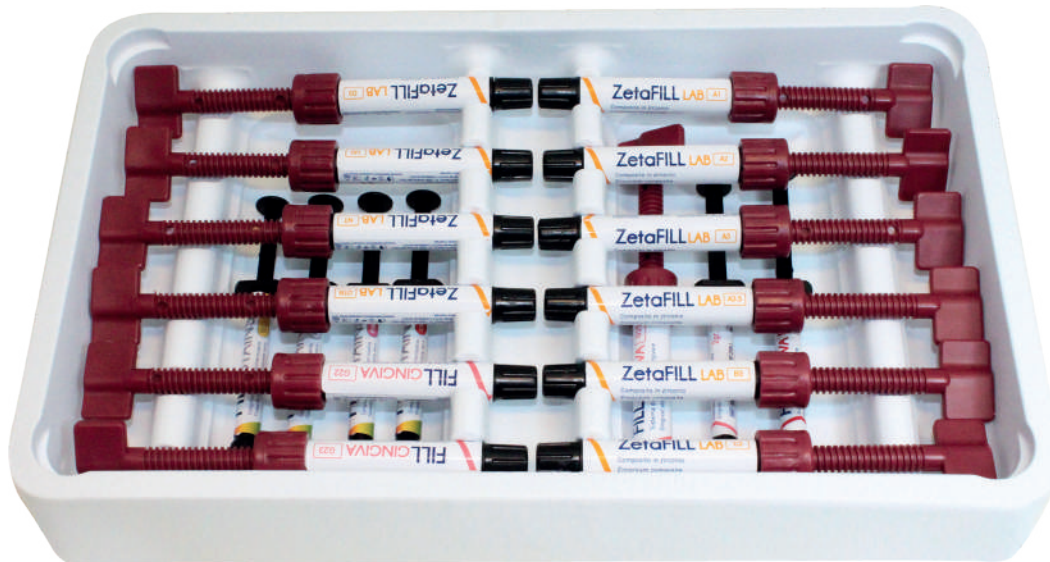

Kit - 10 syringes

9200100 | ZetaFILL Lab Kit - 10 syr.

Kit - 4 syringes

9200101 | ZetaFILL Lab Kit - 4 syr.

APPLICATIONS

Ricostruzioni indirette di corone, ponti, inlay, onlay e faccette.
Recommended for indirect restorations of crowns, bridges, inlay, onlay and veneers.

CHARACTERISTICS

- Composito fotopolimerizzabile (con lampada a LED)
Light-cured composite (with LED lamp)
- Riempitivo di nanoparticelle di zirconio
Zirconium nanoparticles filler
- Opalescenza naturale
Natural opalescence
- Lucidatura eccellente
Excellent polishing
- Non richiede l'utilizzo di forni
Doesn't require the use of ovens

ADVANTAGES

- Ricostruzioni altamente estetiche
Highly aesthetic restorations
- Possibilità di ricreare le sfumature della gengiva
Possibility of recreating gingival shades
- Possibilità di riparazioni anche nel cavo orale
Possibility of restorations in the oral cavity as well

PACKAGING

Kit 10 syringes

- 4,5 g x 10 syringes ZetaFILL Lab
DENTIN: A1-A2-A3-A3,5-B3-C2-D3-FOU-T-OTB
- 1,6 g x 8 syringes FILL Stains
Blue-Pink-Orange-Beige-Brown-Grey-White-Yellow
- 2 g x 5 syringes FILL Gingiva
GM21-GM22-GM23-Opaque-Opaque Modifier
- 2 g x 2 syringes
MO-FOU
- 7 ml x 1 bottle ZetaFILL Metal Primer
- 7 ml x 1 bottle ZetaFILL Primer
- 7 ml x 1 bottle ZetaFILL Modifier
- 10 g x 1 syringe ZetaFILL Separator
- Tips
- Shades guide
- IFU

Kit 4 syringes

- 4,5 g x 4 syringes ZetaFILL Lab (**DENTIN:** A2-A3-A3,5-B2)
- 2 g x 1 syringe FILL Gingiva (Opaque)
- 2 g x 1 syringe each (MO-FOU)
- 7 ml x 1 bottle ZetaFILL Primer
- 7 ml x 1 bottle ZetaFILL Modifier
- 10 g x 1 syringe ZetaFILL Separator
- Tips
- Shades guide
- IFU

ZETA FILL LAB - REFILL

Composito fotopolimerizzabile per ricostruzioni indirette

Light cured composite for indirect restorations



Syringes - 4,5 g

9200103	ZetaFILL Lab Syr. - A1	9200131	ZetaFILL Lab Syr. - IB
9200104	ZetaFILL Lab Syr. - A2	9200132	ZetaFILL Lab Syr. - IU
9200105	ZetaFILL Lab Syr. - A3	9200133	ZetaFILL Lab Syr. - IY
9200106	ZetaFILL Lab Syr. - A3,5		
9200107	ZetaFILL Lab Syr. - A4	9200134	ZetaFILL Lab Syr. - OTB
		9200135	ZetaFILL Lab Syr. - OTG
9200108	ZetaFILL Lab Syr. - B1		
9200109	ZetaFILL Lab Syr. - B2		
9200110	ZetaFILL Lab Syr. - B3		
9200111	ZetaFILL Lab Syr. - B4		
9200112	ZetaFILL Lab Syr. - C1		
9200113	ZetaFILL Lab Syr. - C2		
9200114	ZetaFILL Lab Syr. - C3		
9200115	ZetaFILL Lab Syr. - C4		
9200116	ZetaFILL Lab Syr. - D2		
9200117	ZetaFILL Lab Syr. - D3		
9200118	ZetaFILL Lab Syr. - D4		
9200119	ZetaFILL Lab Syr. - OP		
9200121	ZetaFILL Lab Syr. - OA2		
9200122	ZetaFILL Lab Syr. - OA3		
9200123	ZetaFILL Lab Syr. - OA3,5		
9200124	ZetaFILL Lab Syr. - OA4		
9200125	ZetaFILL Lab Syr. - UO		
9200126	ZetaFILL Lab Syr. - UD		
9200127	ZetaFILL Lab Syr. - DT		
9200128	ZetaFILL Lab Syr. - CT		
9200129	ZetaFILL Lab Syr. - NT		
9200130	ZetaFILL Lab Syr. - ET4		

OPAQUE

Fondation Opaque Universal

Margin Opaque

Dentine Opaque

Dentine

Fill Stain

TRANSPARENT

Translucent

Incisal

Opalescent

PACKAGING

Refill - Syringe

- 4,5 g x 1 syringe

DENTIN:

A1-A2-A3-A3,5-A4
B1-B2-B3-B4
C1-C2-C3-C4
D2-D3-D4

OPAQUE:

OP-OA2-OA3-OA3,5-OA4-UO-UD

TRANSLUCENT:

DT-CT-NT-ET4

INCISAL:

IB-IU-IY (BROWN - UNIVERSAL - YELLOW)

OPALESCENT:

OTB-OTG

Prodotti correlati

9200192	ZetaFILL Lab Metal Primer - 7 ml
9200193	ZetaFILL Lab Comp. Primer - 7 ml
9200194	ZetaFILL Separator Syr. - 3 g
9200195	ZetaFILL Separator Syr. - 10 g
9200197	ZetaFILL Lab Modifier - 7 ml
9200102	ZetaFILL Lab - FOU
9200136	ZetaFILL Lab - MO

DABLIU LAB

Silicone a reazione di policondensazione

Polycondensation silicone



Dabliu Lab - 5 kg bucket

FF0000314	Dabliu Lab - 75
FF0000315	Dabliu Lab - 85
FF0000316	Dabliu Lab - 95

APPLICATIONS

Silicone per condensazione, consigliato per la creazione di controstampi su muffola in protesi rimovibili, per mascherine usate nella creazione di gengiva artificiale con tecnica indiretta e per stampi destinati alla colatura di resine autopolimerizzanti, oltre a molte altre applicazioni.

Condensation silicone, recommended for the creation of counter molds on muffle in removable prostheses, for templates used in the creation of artificial gingiva using an indirect technique, and for molds intended for casting self-curing resins, among many other applications.

CHARACTERISTICS

- Iso 4823 - ADA 19
- Durezza dopo 24h / *Hardness after 24h*
75:75 sh - 85:85 sh. - 95:95 sh.
- Rapporto di miscelazione / *Mixing ratio*
100:1
- Recupero elastico / *Elastic recovery*
< 1,0
- Tempo di miscelazione / *Mixing time*
75 sh: 1'00 - 85 sh: 1'00 - 95 sh: 20"-30"
- Tempo di fissaggio totale / *Total fixing time*
75 sh: 5'00 - 85 sh: 5'00 - 95 sh: 4'00
- Colore / *Colours*
75 sh: Neutro / *Neutral*
85 sh: Verde / *Green*
95 sh: Arancione / *Orange*

PACKAGING

Dabliu Lab

- 5 kg bucket (75 / 85 / 95 shore)

Dabliu Catalyst

- Dabliu Catalyst paste 1 x 60 ml
- Dabliu Catalyst liquid 1 x 30 ml

DABLIU LAB A+B

Silicone a reazione di policondensazione ad altissima viscosità

Very high viscosity polycondensation silicone



FF0000327	Dabliu Lab A+B - 70
FF0000328	Dabliu Lab A+B - 85
FF0000329	Dabliu Lab 4+B - 90

APPLICATIONS

Silicone a reazione di poliaddizione ad altissima viscosità per stampa ceramica, mascherine di controllo, esecuzione di manufatti, riparazione protesi e base per la lavorazione di resine fotopolimerizzabili.

Very high viscosity addition silicone recommended for ceramic printed technique, control masks, prosthesis restoration and as base for light cured resins production.

CHARACTERISTICS

- Iso 4823 - ADA 19
- Durezza dopo 24h / *Hardness after 24h*
70:75 sh - 85:85 sh. - 90:95 sh.
- Rapporto di miscelazione / *Mixing ratio*
1:1
- Recupero elastico / *Elastic recovery*
99,4 %
- Tempo di miscelazione / *Mixing time*
60"
- Tempo di lavorazione / *Working time*
120"
- Tempo di fissaggio totale / *Total fixing time*
180"
- Deformazione alla compressione / *Deformation to compression*
0,2%

PACKAGING

5 kg x 2 buckets (70 / 85 / 90 shore)

DUPLEX ANGLE 22

Silicone a reazione di poliaddizione a bassissima viscosità - 22 shore

Very low viscosity polyaddition reaction silicone - 22 shore



FF0000325 Duplex Angle - 22

APPLICATIONS

Silicone a reazione di poliaddizione a bassissima viscosità e alta resistenza alla lacerazione. Indicato per la duplicazione in laboratorio con elevati sottosquadri.

Addition reaction silicone with very low viscosity and high tear resistance. Suitable for laboratory duplication with deep undercuts.

CHARACTERISTICS

- Iso 4823 - ADA 19
- Durezza dopo 24h / *Hardness after 24h*: 22 shore
- Rapporto di miscelazione / *Mixing ratio*: 1:1
- Recupero elastico / *Elastic recovery*: < 0,05%
- Tempo di lavoro totale (23°C) / *Total working time (23°C)*: 3'00"
- Tempo di presa (23°C) / *Fixing time (23°C)*: 15' 00"
- Riproduzione dei dettagli / *Details reproduction*: 2 micron
- Colore / *Colour*: Celeste / *Light Blue*

PACKAGING

5 kg x 2 buckets (70 / 85 / 90 shore)

DABLIU CATALYST

Catalizzatori per siliconi

Silicone catalysts



FF0000312 Dabliu Catalyst - Paste

FF0000313 Dabliu Catalyst - Liquid

APPLICATIONS

Catalizzatore per resine silconiche.

Catalyst for silicone resins.

PACKAGING

- Dabliu Catalyst paste 1 x 60 ml
- Dabliu Catalyst liquid 1 x 30 ml

DABLIU TRAY LC

Placche in resina fotopolimerizzabili

Light-curing resin impression trays



00340096 Dabliu Tray LC

APPLICATIONS

Placche fotopolimerizzabili in resina tixotropica indicate per lavori di precisione, portaimpronte individuali, funzionali e basi per il montaggio di denti in protesi.

Photopolymerizable plates made of thixotropic resin, suitable for precision work, individual trays, functional trays, and bases for mounting teeth in prosthetics.

CHARACTERISTICS

- Spessore 2,3 mm
Thickness 2,3mm
- Colore Rosa
Pink colour

PACKAGING

Box x 450 g - 50 pcs

DABLIU TRAY

Piastre basali

Base plates



00461185 Dabliu Tray

APPLICATIONS

Materiale termoplastico di alta qualità per la preparazione di portaimpronte individuali, basi di masticazione e basi per il montaggio di denti in protesi.

High-quality thermoplastic material for the preparation of individual trays, bite bases, and bases for mounting teeth in prosthetics.

CHARACTERISTICS

- Spessore 2 mm
Thickness 2 mm
- Colore grigio
Grey colour

PACKAGING

Box 100 pcs

ORTHO FORM

Placche termoformabili

Thermoformable plates



REF 00XXXXR



Ø 120 mm

REF 00XXXXRB



Ø 134 mm

REF 00XXXXRS



Ø 125 mm

REF 00XXXX



125 x 125 mm

APPLICATIONS

Ortho Form placche termoplastiche rigide e morbide, adatte per qualsiasi tipo di lavorazione come mascherine per sbiancamento, bite per bruxismo, applicazioni per ATM, mascherine di contenzione, ecc.

Ortho Form rigid and soft thermoplastic plates, suitable for various types of products such as whitening trays, bruxism bites, ATM applications, retention trays, etc.

INDICATIONS

Riportiamo di seguito alcune indicazioni al fine di ottenere una termoformatura ottimale:

Below are some guidelines to achieve optimal thermoforming:

- Per i modelli si consiglia l'utilizzo di un gesso di IIIa classe;
For the models, it is recommended to use a type III gypsum;
- Evitare l'utilizzo di gessi troppo duri (causerebbero la rottura del modello in fase di distacco);
Avoid using gypsum that is too hard (as it could cause the model to break during the detachment phase);
- Per ottenere un buon dettaglio il gesso deve avere un'ottima permeabilità all'aria;
To achieve good detail, the gypsum must have excellent air permeability;
- Il modello in gesso non dev'essere assolutamente bagnato, al massimo può essere umido;
The gypsum model must not be wet; it can be slightly damp;
- In caso di modelli alti, si consiglia di ridurli con una

squadramodelli, o immergerli in sfere di acciaio in modo da far fuoriuscire solo la parte da termoformare;

For tall models, it is recommended to reduce their height with a model trimmer, or immerse them in steel spheres so that only the part to be thermoformed is exposed;

- Eliminare eventuali bolle causate dalla colatura del gesso;
Remove any bubbles caused by the pouring of the gypsum;
- Valutare le caratteristiche tecniche / fisiche dei fogli termoplastici prima dell'utilizzo.

Evaluate the technical and physical characteristics of the thermoplastic plates before use.

Soft Form

Etilvinilacetato (EVA), indicato per mascherine di sbiancamento, patologie ATM, fluoro profilassi, docce morbide per Bruxismo.

Eva material, recommended for bleaching masks, ATM pathologies, fluoride prophylaxis, Bruxism.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
1,0 mm	24 pcs	001817	001817R	001817RS	001817RB
1,5 mm	20 pcs	001835	001835R	001835RS	001835RB
2,0 mm	20 pcs	001836	001836R	001836RS	001836RB
3,0 mm	10 pcs	001837	001837R	001837RS	001837RB
4,0 mm	10 pcs	001838	001838R	001838RS	001838RB

Dura Form

Polietilene tereftalato, indicato per matrici provvisorie, docce dure per Bruxismo e sbiancamento, cucchiai chirurgici e applicazioni in ortodonzia.

Polyethylene terephthalate recommended for temporary matrix, Bruxism and bleaching bites, surgical tray and orthodontic appliances.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
0,5 mm	24 pcs	001828	001828R	001828RS	001828RB
0,8 mm	24 pcs	001827	001827R	001827RS	001827RB
1,0 mm	24 pcs	001823	001823R	001823RS	001823RB
1,5 mm	20 pcs	001824	001824R	001824RS	001824RB
2,0 mm	15 pcs	001826	001826R	001826RS	001826RB
3,0 mm	10 pcs	001833	001833R	001833RS	001833RB

Dual Form

Placca a due strati, strato duro SBS e strato morbido EVA. Consigliata per docce rigide per Bruxismo, patologie ATM ed applicazioni in ortodonzia.

Plate with two layers, SBS hard layer and EVA soft layer. Suitable for Bruxism, ATM pathologies orthodontic appliances.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
2 mm	10 pcs	001943	001943R	-	-
3 mm	10 pcs	001939	001939R	-	-

Base Plate Form

Stirene ad alta compressione. Indicato per cucchiai per montaggi in protesi totale e supporti rinforzati per valli di cera (masticoni).

High compression styrene. Recommended for trays and reinforced supports to fit complete dentures.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
1,5 mm	24 pcs	001819	001819R	-	-
2,0 mm	20 pcs	001818	001818R	-	-
2,5 mm	10 pcs	001820	001820R	-	-

Coping Form

Polipropilene opaco, indicato per ponti e corone provvisorie, cappette calcinabili.

Opaque polypropylene suitable for temporary bridges and crowns, castable copings.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
0,5 mm	24 pcs	001830	001830R	-	-
0,8 mm	24 pcs	001831	001831R	-	-
1,0 mm	24 pcs	001832	001832R	-	-

Tray Form

Stirene ad alta compressione. Indicato per portaimpronte individuali.

High compression styrene. Recommended for individual impression trays.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
3 mm	10 pcs	001822	001822R	-	-

POMICE EXTRA FINE

Extra fine pumice



00280030 Extra fine pumice

APPLICATIONS

Pomice naturale per la lucidatura di manufatti protesici.
Natural pumice for polishing prosthetic appliances.

PACKAGING

5 kg x 1 bucket

DABLIU STONE - TIPO IV EXTRA DURO

Dabliu Stone gypsum: type IV extra hard



00280018 Dabliu Stone extra hard gypsum type IV

APPLICATIONS

Dabliu Stone è un gesso extraduro di tipo IV, ideale per modelli e monconi ad alta precisione, addizionato con resine sintetiche. Colore marrone.

Dabliu Stone is an extra-hard type IV gypsum, ideal for high-precision models and abutments, with synthetic resins added. Brown color.

PACKAGING

5 kg x 1 bucket

DABLIU STONE - TIPO IV PER MODELLI

Dabliu Stone gypsum: type IV for models



00280010 Dabliu Stone type IV gypsum for models - 5 kg
00280034 Dabliu Stone type IV gypsum for models - 15 kg

APPLICATIONS

Dabliu Stone è un gesso extraduro di tipo IV, ideale per modelli ad alta precisione. Colore giallo.

Dabliu Stone is an extra-hard type IV gypsum, ideal for high-precision models. Yellow color.

PACKAGING

- 5 kg x 1 bucket
- 15 kg x 1 bucket

DABLIU STONE - TIPO III ORTODONTICO

Dabliu Stone gypsum: type III for the orthodontic field



00280027	Dabliu Stone orthodontic gypsum type III - 5 kg
00280026	Dabliu Stone orthodontic gypsum type III - 15 kg

APPLICATIONS

Dabliu Stone è un gesso di tipo III, per modelli ortodontici di alta qualità. Colore bianco.

Dabliu Stone is a type III gypsum for high-quality orthodontic models. White color.

PACKAGING

- 5 kg x 1 bucket
- 15 kg x 1 bucket

DABLIU STONE - TIPO IV EXTRA DURO ORTODONTICO

Dabliu Stone gypsum: type IV extra hard for the orthodontic field



00280017	Dabliu Stone orthodontic gypsum type IV - 5 kg
00280028	Dabliu Stone orthodontic gypsum type IV - 15 kg

APPLICATIONS

Dabliu Stone è un gesso di tipo IV extraduro, ideale per modelli ortodontici di alta qualità. Colore bianco.

Dabliu Stone is an extra-hard type IV gypsum, ideal for high-quality orthodontic models. White color.

PACKAGING

- 5 kg x 1 bucket
- 15 kg x 1 bucket

DABLIU STONE - TIPO III PER MODELLI

Dabliu Stone gypsum: type III for models



00280021	Dabliu Stone type III gypsum for models - 5 kg
00280041	Dabliu Stone type III gypsum for models - 15 kg

APPLICATIONS

Dabliu Stone è un gesso duro di tipo III, ideale per modelli ad alta precisione. Colore giallo.

Dabliu Stone is an hard type III gypsum, ideal for high-precision models. Yellow color.

PACKAGING

- 5 kg x 1 bucket
- 15 kg x 1 bucket

DABLIU STONE - TIPO II ALABASTRINO

Dabliu Stone gypsum: type II alabaster



APPLICATIONS

Dabliu Stone è un gesso alabastrino di tipo II, ideale per le basi dei modelli. Colore bianco.

Dabliu Stone is a type II alabastrine gypsum, ideal for model bases. White color.

PACKAGING

25 kg x 1 bag

00280048 Dabliu Stone type II alabastrine

DABLIU STONE - PER ARTICOLATORI

Dabliu Stone gypsum: for articulators



APPLICATIONS

Dabliu Stone è un gesso di tipo III ad elevata precisione, ottima lavorabilità e ridottissima espansione. Ideale per il posizionamento di modelli in articolatore. Colore bianco.

Dabliu Stone is a type III gypsum with high precision, excellent workability and very low expansion. Ideal for placing models in articulator. White color.

PACKAGING

- 5 kg x 1 bucket
- 25 kg x 1 bag

00280008 Dabliu Stone for articulators - 5 kg

00280032 Dabliu Stone for articulators - 25 kg

DABLIU WAX

Rosa - rosso - rosso scuro

Pink - red - dark red



22501000	Dabliu Wax - Pink
22521000	Dabliu Wax - Red
00170006	Dabliu Wax - Dark red

APPLICATIONS

Cere speciali ideate per soddisfare tutte le necessità in campo di protesi dentarie.

Special waxes designed to satisfy all the dental prosthesis requirements.

CHARACTERISTICS


- Rapida solidificazione dopo l'applicazione
Fast solidification after its application
- Elevata resistenza alla rottura o frantumazione
High resistance to breakage or crumbling
- Eccellente modellabilità
Excellent shaping
- Ridotta contrazione termica e ridotta memoria
Thermic shrinkage and memory reduced
- Inodore ed insapore
Odourless and flavorless
- Non irrita tessuti orali
No irritation of the oral tissues
- Facile da manipolare, non aderisce alle dita durante la lavorazione
Easy to work, without adhesion to hands during its use
- Non lascia residui
No residuals
- Ottima flessibilità e consistenza
Excellent flexibility and texture
- Indicata per le registrazioni occlusali
Recommended for occlusal registrations

PACKAGING

500 g x 1 box

DABLIU WAX - CERA PER MODELLAZIONE BIANCA

Modelling wax: white

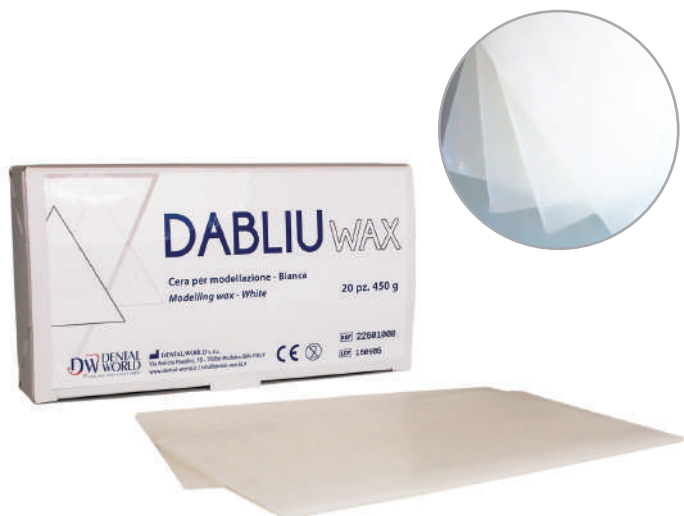

22601000	Special modelling wax: white
----------	------------------------------

APPLICATIONS

Cera indicata per la realizzazione di modelli da studio ed ortodontici. Colore bianco

Recommended for the realization of study and orthodontic models. White colour

CHARACTERISTICS

- Inodore ed insapore. Facile da manipolare
Odourless and flavorless. Easy to work with
- Colorazione simile a quella di un dente artificiale
Colour similar to an artificial tooth
- Ottima flessibilità e consistenza
Excellent flexibility and texture
- Buona resistenza alla rottura o frantumazione
High resistance to breakage or crumbling
- Raffreddamento immediato dopo l'applicazione
Instant cooling after the application

PACKAGING

450 g x 1 box

DABLIU WAX - CERA PER MODELLAZIONE NORMALE ED ESTIVA

Modelling wax: normal and hot climate



Normal wax

21001000	Special modelling wax: 450 gr.
21001100	Special modelling wax: 2,5 kg.

Hot climate wax

22001000	Special modelling wax: 450 gr.
22001100	Special modelling wax: 2,5 kg.

APPLICATIONS

Cera per modellazione standard multiuso, indicata per lavori con protesi mobile

Standard multi-purpose modelling wax, recommended for removable prosthesis

- **Cera per modellazione Normale**
Richiede un punto di fusione basso
Normal modelling wax
Low meltingpoint
- **Cera per modellazione Estiva**
Richiede un punto di fusione superiore
Hot climate modelling wax
High melting point

PACKAGING

- 450 g x 1 box
- 2,5 kg x 1 box

DABLIU WAX - CERA UTILITY ROSSA

Utility wax: red



APPLICATIONS

Cera per uso generico ideale per piccole imperfezioni e riempimenti. Permette di lavorare su di essa le cere modellanti, grazie all'elevato punto di fusione. É realizzata in fogli con proprietà plastiche a temperature ambiente e presenta proprietà elastiche.

General purpose wax ideal for small imperfections and fillers. It allows modeling waxes to be worked on due to its high melting point. It is made in sheets with plastic properties at room temperature and has elastic properties.


PACKAGING

- **Sheets:** 174 x 94 x 5 mm - 450 g - 6 pcs
- **Strips:** 174 x 5 mm - 375 g - 119 pcs

24001051	Utility wax - Sheets
24101051	Utility wax - Strips

DABLIU WAX - CERA PER BORDAGGIO IN BASTONCINI

Bars borders wax

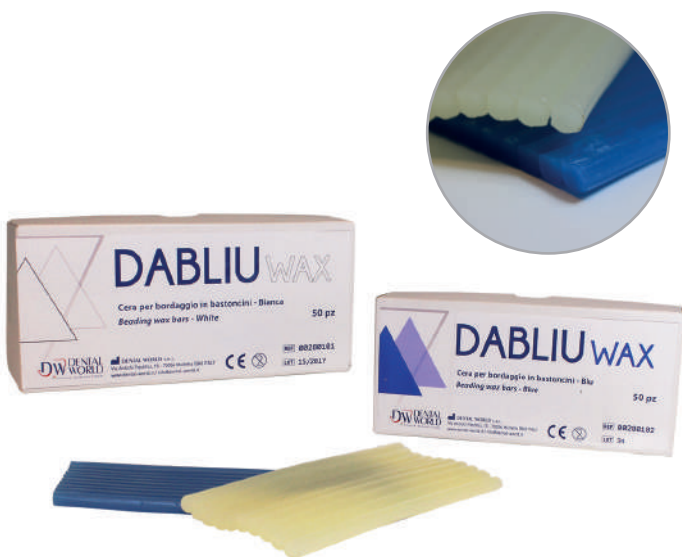

APPLICATIONS

Cera per bordaggio in bastoncini. Disponibile nella colorazione bianca o blu.

Beading wax in sticks. Available in white or blue coloring.

PACKAGING

150 mm - 50 pcs

00280101	Bars border wax - White
00280102	Bars border wax - Blue

DABLIU WAX - CERA PER BOXAGGIO IN STRISCE

Boxing wax: strips



APPLICATIONS

Cera per boxaggio in strisce. Colore giallo.
Boxing wax in strips. Yellow color.

PACKAGING

280 x 35 mm - 25 pcs



00280106 Boxing wax in strips - Yellow

DABLIU WAX - CERA OCCLUSALE PREFORMATA

Preformed occlusal wax



APPLICATIONS

Cera occlusale ideale per la registrazione dei rapporti intermascellari a ferro di cavallo con anima in alluminio. Evita contrazioni dopo la presa del morso. Colore blu.
Occlusal wax ideal for recording intermaxillary horseshoe relationships with aluminum core. Avoids contractions after the bite is taken. Blue color.

PACKAGING

Spessore / Thickness: 4,5 mm - 10 pcs

00280107 Horse shoe shape articular wax - Blue

DABLIU WAX - CERA PER IMMERSIONE

Dipping wax



25504451	Dipping wax
----------	-------------

APPLICATIONS

Cera di alta qualità ideale per la tecnica ad immersione di monconi e per la modellazione a mano di coppette. Colore giallo.
High quality wax, ideal for stumps immersion technique and for the modelling of caps by hand, also. Yellow colour.

CHARACTERISTICS

- Stabilità elastica
Elastic stability
- Non gocciola
No drops
- Ottima viscosità
Excellent viscosity
- Si raffredda rapidamente
Rapid cooling
- Contrazione minima
Minimum shrinkage

PACKAGING

80 g x 1 tin

DABLIU WAX - CERA PER ARTICOLAZIONI 2 MM / 4 MM

Articular wax : 2mm / 4mm



APPLICATIONS

Cera indicata per registrazioni occlusali in protesi
It is recommended for occlusal registration in prosthesis

CHARACTERISTICS

- Estrema durezza al freddo
Extreme hardness at cold
- Elevata elasticità al caldo
High elasticity at hot


PACKAGING

- Sheets 2 mm - 450 g - 15 pcs
- Sheets 4 mm - 200 g - 10 pcs

23801000	Articular wax - 2 mm
23003010	Articular wax - 4 mm

DABLIU WAX - CERA PER ARTICOLAZIONI BASTONCINI O FERRO DI CAVALLO

Articular wax: stick or horse shoe shape

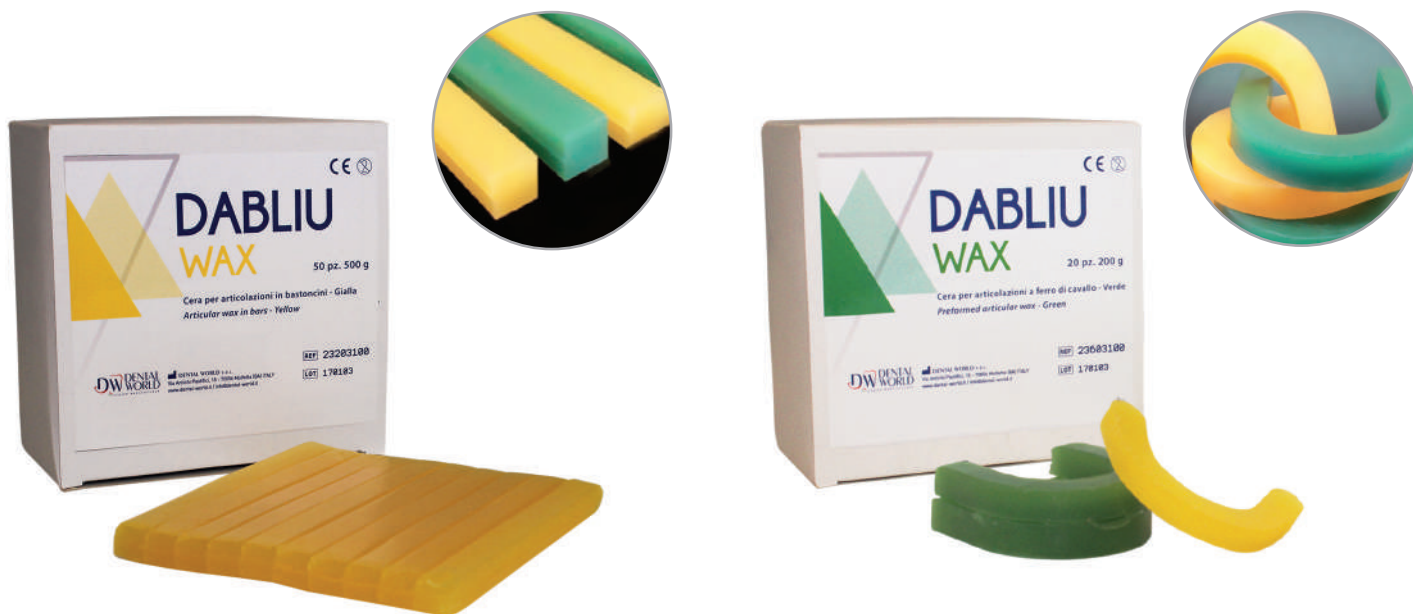

Horse shoe shape

23603100	Green articular wax - 200 mm - 20 pcs
23503100	Yellow articular wax - 200 mm - 20 pcs
00280105	Yellow articular wax - 200 mm - 100 pcs

Straight bars

23203100	Yellow articular wax - 100 mm - 500 gr. - 50 pcs
23271060	Yellow articular wax - 170 mm - 600 gr. - 36 pcs
23303100	Green articular wax - 100 mm - 500 gr. - 50 pcs
23371060	Green articular wax - 170 mm - 600 gr. - 36 pcs

APPLICATIONS

Cera indicata per registrazioni oclusali per pazienti edentuli o con dentizione parziale.

It is recommended for occlusal registration for partial or fully edentulous patients.

CHARACTERISTICS

Cera per articolazioni gialla

- Necessita di lieve riscaldamento
- Durezza ed elasticità standard

Articular yellow wax

- *Soft warming needed*
- *Standard hardness and elasticity*

Cera per articolazioni verde

- Condizioni termiche normali
- Non necessita di riscaldamento
- Buona elasticità e minore durezza

Articular green wax

- *Standard heat conditions*
- *Warming not needed*
- *Good elasticity and less hardness*

PACKAGING

Ferro di cavallo / Horse shoe shape

- 200 mm - 20 pcs
- 200 mm - 100 pcs

Bastoncini / Bars

- 100 mm - 500 gr. - 50 pcs
- 170 mm - 600 gr. - 36 pcs

DABLIU WAX - CERA COLLANTE BASTONCINI

Sticky wax: Bars



25005001 Sticky wax

APPLICATIONS

Cera indicata per il fissaggio delle protesi mobili. Eccellente per il fissaggio dei denti in resina, alle pareti anteriori ed al modello. Permette l'unione dei basamenti e dei blocchi occlusali. Colore giallo.

It is recommended for the fixing of mobile prosthesis; excellent for the fixing of resin teeth, to anterior sides and to the model. It allows the union of the base and the occlusal blocks. Yellow colour.

CHARACTERISTICS

- Contrazione ed ottima fluidità
Shrinkage and excellent fluidity
- Eccellente adesione al metallo
Excellent adhesion to the metal
- Si rimuove facilmente con il vapore
Easy to remove with steam
- Non lascia residui
No residuals

PACKAGING

100 g - 12 pcs

DABLIU WAX - CERA PER MODELLAZIONE A PEZZI

Modelling wax: blocks



00280108 Modelling wax in blocks

APPLICATIONS

Cera a pezzi indicata per la modellazione di faccette, corone e ponti. Sopporta spessori sottili, non si incolla né si sfoglia. Colore verde.

Modelling wax in blocks recommended for veneers, crowns and bridges. It supports thin thicknesses; it doesn't stick or peel. Green colour.

PACKAGING

500 g

DABLIU WAX - CERA PER MODELLAZIONE SEMIDURA

Modelling wax: semi-hard



25055051 Semi hard modelling wax

APPLICATIONS

Cera per modellazione ideale per corone, ponti e inlay. Semidura, è indicata per una più semplice percezione dei contorni del modello. Utilizzata allo stato liquido, garantisce una straordinaria plasticità semplificando la preparazione del modello. Colore blu. *Modelling wax recommended for crowns, bridges and inlay. Semi-hard, it is ideal for an easy perception of the model margin lines. It is used at liquid state which guarantees an excellent plasticity that simplifies the preparation of the models. Blue colour.*

CHARACTERISTICS

- Meno rigida e resistente alla rottura
Less rigid and resistant to breakage
- Facile da rimuovere senza rotture o frantumazione
Easy to remove without breakages or crushing
- Bassa contrazione
Low shrinkage
- Brucia senza lasciare residui
It burns without residuals

PACKAGING

50 g x 1 metal tin

DABLIU WAX - CERA DI PRESENTAZIONE

Presentation wax



25255051 Presentation wax

APPLICATIONS

Cera utilizzata per la realizzazione di modelli da studio e lavori di ortodonzia. Colore bianco. *It is recommended for the realization of study models and orthodontic works. White colour.*

CHARACTERISTICS

- Colorazione simile al dente
Tooth colour
- Non presenta granuli nè parti dure
No granules and hard section
- Bassa contrazione, ottima lavorabilità
Low shrinkage, excellent workability
- Facile da manipolare allo stato solido
Easy to mix at solid state
- Non subisce rotture
No breaks

PACKAGING

50 g x 1 metal tin

DABLIU WAX - CERA PER MODELLAZIONE DURA

Modelling wax: hard



25105051 Hard modelling wax

APPLICATIONS

Cera per modellazione permette di rilevare facilmente un contatto prematuro delle superfici oclusali. Ideale per la modellazione di superfici masticatorie, per la configurazione delle pareti coronali e per l'assemblaggio di articolazioni di ponti inlay in resina o ceramica. Colore blu.

This modelling wax allows an easy detection of premature contacts concerning the occlusal surfaces. It is recommended to model the chewing surfaces, to shape the crown sides and to assemble the articulations of bridges for resin or ceramic inlay. Blue colour.

CHARACTERISTICS

Brucia senza lasciare residui.

It burns without residuals.

PACKAGING

50 g x 1 metal tin

DABLIU WAX - CERA CERVICALE

Cervical wax



25155051 Cervical wax

APPLICATIONS

Cera indicata per la precisa modellazione di margini cervicali, di corone e inlay per una facile percezione dei contorni marginali, può essere separata dalla corona senza che si deformi o si rompa. Colore rosso.

It is recommended for the precise modelling of the cervical sides, crowns and inlay for an easy perception of the marginal sides; it can be separated from the crown without any deformation or breaking. Red colour.

CHARACTERISTICS

- Semplice modellazione
Easy to model
- Facile da intagliare
Easy to carve
- Morbida senza tensione ed elasticità
Soft, elastic and tension free
- Bassa temperatura di solidificazione
Low temperature of solidification

PACKAGING

50 g x 1 metal tin

DABLIU WAX - CERA PER FRESAGGIO

Milling wax



25205051 Milling wax

APPLICATIONS

Cera estremamente dura indicata per la realizzazione di lavori che richiedono l'uso di strumenti rotanti. Colore blu scuro.
Extra hard wax recommended for the realization of works which need the use of rotary instruments. Dark blue colour.

CHARACTERISTICS

- Estremamente dura
Extra hard
- Facile da intagliare e rimuovere
Easy to carve and to remove
- Facile da manipolare con una spatola calda
Easy to manipulate with a warm spatula
- Resistente alla frantumazione e lacerazione
Tear and fracture resistance
- Non si frantuma e non lascia residui
No residuals

PACKAGING

50 g x 1 metal tin

PREFORMATI IN CERA IN BLOCCO

Preformed wax patterns: blocks



APPLICATIONS

Preformati in cera utilizzati in operazioni con molteplici sostituzioni dentali, ottimi per affrontare lavori impegnativi senza dover memorizzare un gran numero di pezzi.
Preformed wax patterns conceived for works where more than one tooth must be substituted; excellent to realize the most demanding work without having to store a lot of pieces

PACKAGING

Kit - Boxes: 435 pcs

- 6 shapes
- 3 sizes
- Blocchi da 2 pezzi per incisivi
Blocks of 2 pieces for incisives
- Blocchi da 3 pezzi per molari e premolari
Blocks of 3 pieces for molars and premolars

Refill - Bags: 24 pcs

6 models


TAMAÑO	16-15-14	12-11	11-21	21-22	24-25-26	DIFENTE
1	L1	F1	A1	G1	M1	1
2	L2	F2	A2	G2	M2	2
3	L3	F3	A3	G3	M3	3
3	M3	B3	B3	B3	L3	3
2	M2	B2	B2	B2	L2	2
1	M1	B1	B1	B1	L1	1
DIENTE	46-45-44	42-41	41-31	31-32	34-35-36	TAMAÑO

29009---	Bags of blocks preformed wax patterns - 24 pcs
290092--	Bags of triangular casting sprues - 12 pcs

290090Z1	Box of single preformed wax pattern + casting sprues
290090Z2	Box of single preformed wax pattern - 360 blocks
290091X3	Box of single preformed wax pattern - 432 blocks

FOGLI IN CERA - LISCI E RUVIDI PER SCHELETRATI

Smooth and coarse sheets: for skeletons

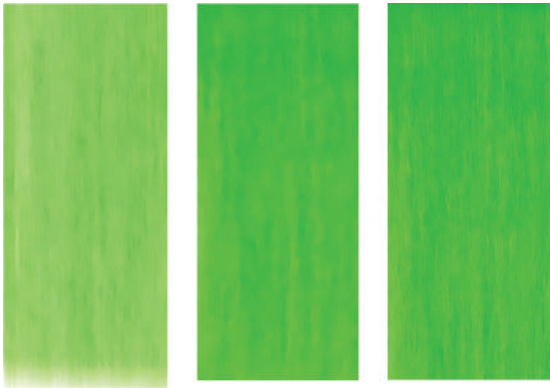

APPLICATIONS

Cera di rapido e semplice adattamento, con una buona aderenza al modello durante la duplicazione. Colore verde.

Wax with a fast and easy adaptation, with great adhesion to the model during the duplication. Green colour.

CHARACTERISTICS

- Ottima trasparenza e stabilità
Excellent clearness and stability
- 75 x 80 mm
- 0,3 mm - 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm

PACKAGING

Lisci o Ruvidi - 10 fogli

Smooth or coarse - 10 sheets

Smooth sheets

26500031	Smooth sheets - 0,3 mm
26500041	Smooth sheets - 0,4 mm
26500051	Smooth sheets - 0,5 mm
26500061	Smooth sheets - 0,6 mm

Coarse sheets


26520031	Coarse sheets - 0,3 mm
26520041	Coarse sheets - 0,4 mm
26520051	Coarse sheets - 0,5 mm
26520061	Coarse sheets - 0,6 mm

Very coarse sheets


26540031	Very coarse sheets - 0,3 mm
23540041	Very coarse sheets - 0,4 mm
26540051	Very coarse sheets - 0,5 mm
26540061	Very coarse sheets - 0,6 mm

GANCI PROFILATI - IN CERA PER SCHELETRATI


Preformed wax hooks: for skeletons

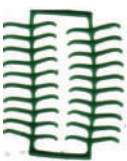

Bicuspid hooks

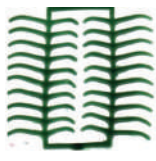

Molar hooks

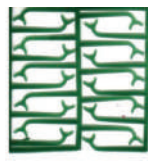

Bonyhard



Curved ring hooks

APPLICATIONS

Profilati con cera altamente flessibile e aderente, anatomici e facilmente adattabili. Colore verde.

High flexible, adherent and anatomical wax hooks; easy to adapt. Green colour.

TPOLOGY

- Ganci per premolari / *Premolar hooks*
- Ganci per molari / *Molar hooks*
- Bonyhard / *Bonyhard*
- Ganci ad anello curvi / *Curved ring hooks*



PACKAGING

200 pcs

26552241	Bicuspid hooks
26552221	Molar hooks
26552261	Bonyhard
26552281	Curver ring hooks

RETICOLATI IN CERA

Grid wax

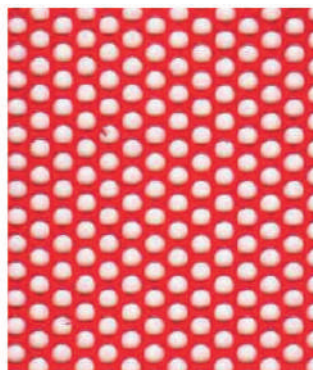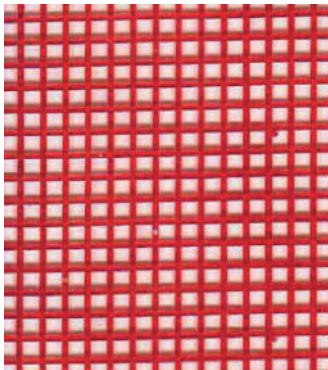

26552021	Grid wax - Square holes
26552041	Grid wax - Round holes

APPLICATIONS

Aderiscono facilmente e sono stabili nelle forme. Colore rosso.
Easy adhesion and high stability. Red colour.

TPOLOGY

66x66 mm - Quadrati / Tondi *Square / Round*

PACKAGING

15 pcs

RITENZIONI IN CERA

Preformed wax retainer



APPLICATIONS

- Buona stabilità, plasticità e flessibilità, garantiscono una maggiore aderenza al modello.
Good stability; great plasticity and flexibility. Good adhesion to the model.
- Ottima lavorabilità. Colore rosso.
Easy to work with. Red colour.

DIMENSIONS

130x10 mm


PACKAGING

25 pcs

26552121	Punched wax
----------	-------------

FILO DI CERA - BOBINA E BASTONCINI

Wire wax: reel and stick

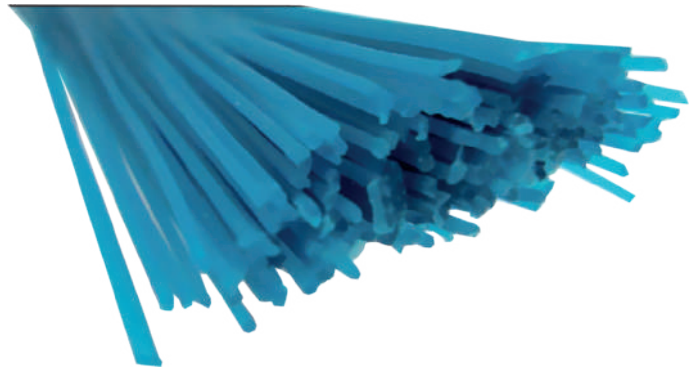

Spool - Blue - Medium

27204351	Wax wire - Ø 2,0 mm - 250 g
27254351	Wax wire - Ø 2,5 mm - 250 g
27304351	Wax wire - Ø 3,0 mm - 250 g
27404351	Wax wire - Ø 4,0 mm - 250 g
27504351	Wax wire - Ø 5,0 mm - 250 g

Spool - Turquoise - Hard

28204351	Wax wire - Ø 2,0 mm - 250 g
28254351	Wax wire - Ø 2,5 mm - 250 g
28304351	Wax wire - Ø 3,0 mm - 250 g
28404351	Wax wire - Ø 4,0 mm - 250 g
28504351	Wax wire - Ø 5,0 mm - 250 g

Wire - Turquoise - Hard

28084271	Wax wire - Ø 0,8 mm - lenght 150 mm - 50 g
28104251	Wax wire - Ø 1,0 mm - lenght 115 mm - 37 g
28104271	Wax wire - Ø 1,0 mm - lenght 150 mm - 50 g
28154271	Wax wire - Ø 1,5 mm - lenght 150 mm - 50 g

APPLICATIONS

Grazie alla particolare composizione i fili in cera non presentano tensione durante la lavorazione. Evitano deformazioni indesiderate e la loro stabilità favorisce un'eccellente maneggevolezza sia al caldo che al freddo.

Thanks to their particular composition, the wires wax are tension free, which avoids undesirable deformations of cast pieces and due to their high stability they have excellent quality to work in cold and hot state.

TYOLOGY

- Filo duro - Turchese
Hard wire - Tourquoise
- Filo medio - Blu
Medium hard wire - Blue

DIMENSION

- Bobina / Spool**
Diametro / Diameter Ø 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 mm
- Filo / Wires**
Diametro / Diameter Ø 0,8 - 1,0 - 1,5 mm
Lunghezza / Lenght 115 - 150 mm

PACKAGING

- Bobina / Reel** 250 gr.
- Filo / Wires** 37 gr. - 50 gr.

BARRE LINGUALI - DI CERA MEZZO TONDO

Lingual wax bars: half round



APPLICATIONS

Profilati in cera per barre linguali, bordi e ritenzioni. Cera di ottima conformazione, senza memoria e buona stabilità. Colore blu.




Lingual, borders and retentions wax bars. Excellent shape, without memory and with good stability. Blue colour.

DIMENSIONS

- Diametro / Diameter \varnothing 2,0 x 1,00 mm
 \varnothing 3,0 x 1,50 mm
 \varnothing 4,0 x 1,70 mm
- Lunghezza / Length 130 mm

PACKAGING

50 g

28700021	Lingual wax bars - Half Round - \varnothing 2,0 x 1,0 mm	
28700041	Lingual wax bars - Half Round - \varnothing 3,0 x 1,5 mm	
28700061	Lingual wax bars - Half Round - \varnothing 4,0 x 1,7 mm	

BARRE LINGUALI - DI CERA CALIBRATA

Lingual wax bars: calibrated



APPLICATIONS

Profilati e nastri in cera per barre linguali, di ottima conformazione, senza memoria e buona stabilità. Colore blu.




Lingual wax bars; excellent shape, without memory and with good stability. Blue colour.

DIMENSIONS

- Diametro / Diameter \varnothing 4,0 x 1,70 mm
 \varnothing 4,0 x 2,40 mm
- Lunghezza / Length 130 mm

PACKAGING

50 g

28700221	Lingual wax bars - Calibrated - \varnothing 4,0 x 1,7 mm	
28700041	Lingual wax bars - Calibrated - \varnothing 4,0 x 1,7 mm	
28700261	Lingual wax bars - Calibrated - \varnothing 4,0 x 1,7 mm	

PR ice



Ghiaccio istantaneo in PE - PE instant ice
Glace instantanée en PÉ - Hielo instantáneo en PE



PREMERE QUI - PRESS HERE
PRESSEZ ICI - PULSAR AQUI

CE 1370

MADE IN ITALY

LA RIVOLUZIONE DEL



Made in Italy

freddo

RAPIDA, PRATICA, ESSENZIALE.



AKOS



POWER MEETS **RELIABILITY**





Dental World s.r.l. Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17
www.dental-world.it / info@dental-world.it

