

# CONDENSATORE

## EasyPack

### Condensatore di guttaperca

**Easy Pack** è un condensatore di guttaperca utilizzato per la compattazione della guttaperca nella sigillatura del terzo apicale, del terzo medio e dei canali laterali, nonché attivazione di soluzioni intracanalari irrigative attraverso il riscaldamento del plugger.

Offre **cinque temperature selezionabili tra 90, 150, 180, 200 e 230°C**.


Dotato di **display LED** per il monitoraggio delle impostazioni e basetta di ricarica USB-C.

#### Caratteristiche:

- Temperatura: min 90°C; max 230°C
- Riscaldamento rapido
- Batteria ricaricabile con base di ricarica USB-C

#### Plugger:

- Fine - 04 - Bianco
- Fine/Medio - 06 - Nero
- Medio - 08 - Rosso
- Medio/Largo - 10 - Giallo

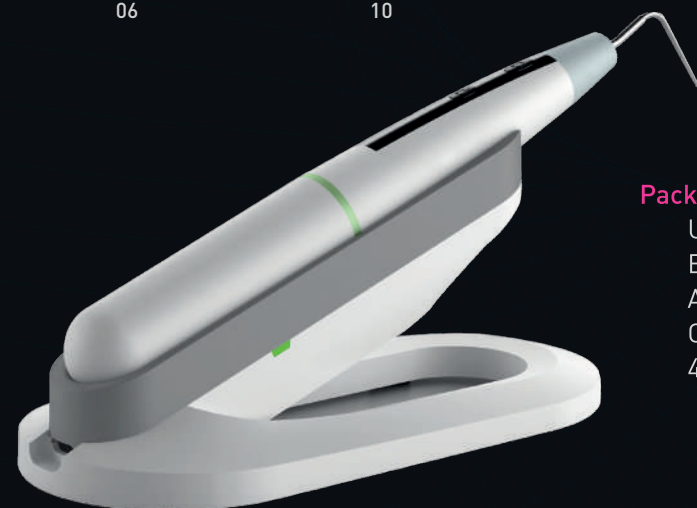

#### Packaging:

- Unità centrale
- Base di ricarica
- Alimentatore USB
- Cavo alimentazione
- 4 plugger

Easy Pack - Compact Pack **790025**

# SPARE PARTS

## Edo-1 PRO

Edo-1 PRO - Testina ricambio	<b>790017</b>
Edo-1 PRO - Batteria	<b>790018</b>
Edo-1 PRO - Attacco per lubrificazione	<b>790019</b>
Edo-1 PRO - Pedale wireless	<b>790020</b>

## EasyFill

EasyFill - Base di ricarica	<b>790036</b>
EasyFill - Gutta refill	<b>790037</b>
EasyFill - Cover protettiva	<b>790038</b>
EasyFill - Chiave per puntali	<b>790039</b>
* EasyFill - Puntale da iniezione - 20G - 24 mm	<b>790040</b>
* EasyFill - Puntale da iniezione - 20G - 28 mm	<b>790041</b>
EasyFill - Puntale da iniezione - 23G - 24 mm	<b>790042</b>
* EasyFill - Puntale da iniezione - 23G - 28 mm	<b>790043</b>
EasyFill - Puntale da iniezione - 25G - 24 mm	<b>790044</b>
EasyFill - Puntale da iniezione - 25G - 28 mm	<b>790045</b>
* EasyFill - Puntale da iniezione - 27G - 24 mm	<b>790046</b>
* EasyFill - Puntale da iniezione - 27G - 28 mm	<b>790047</b>

## EasyPack

EasyPack - Base di ricarica	<b>790026</b>
EasyPack - Puntale F - 04 - Bianco	<b>790027</b>
EasyPack - Puntale F/M - 06 - Nero	<b>790028</b>
EasyPack - Puntale M - 08 - Rosso	<b>790029</b>
EasyPack - Puntale M/L - 10 - Giallo	<b>790030</b>

## Standard

Cavo per rilevatore int. "A" <sup>1</sup>	<b>790049</b>
Cavo per rilevatore ext. "B" <sup>1</sup>	<b>790050</b>
Clip labiale <sup>1</sup>	<b>790051</b>
Pinza per strumento <sup>1</sup>	<b>790052</b>
Cavo alimentazione <sup>2</sup>	<b>790053</b>
Alimentatore USB - DC5V/1.0A <sup>3</sup>	<b>790054</b>
Alimentatore USB - DC5V/2.0A <sup>4</sup>	<b>790055</b>
Batteria di ricambio <sup>5</sup>	<b>790056</b>

#### Legenda:

- 1: Compatibile con Edo-1 PRO, AL-1  
 2: Compatibile con Edo-1 PRO, AL-1, Easy Fill, Easy Pack  
 3: Compatibile con Edo-1 PRO, AL-1, Easy Pack  
 4: Compatibile con Easy Fill  
 5: Compatibile con Easy Fill e Easy Pack  
 \*: Disponibile su richiesta

**DW DENTAL WORLD**  
ITALIAN MANUFACTURER

Distribuito da:

**DENTAL WORLD S.r.l.**

Via Antichi Pastifici, 15 Molfetta (BA) - ITALY  
 Tel. +39 080 3381004 / Fax. +39 080 3386617  
 www.dental-world.it / info@dental-world.it

Prodotto da:

**SANI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD**

666 Jincheng Avenue, HTZ, Chengdu - CHINA  
 Tel. 0086 28 83361652 / Fax. 0086 28 83361651  
 www.medicalsani.com

**DW**  
DENTAL WORLD

L'EVOLUZIONE ENDODONTICA  
INIZIA QUI

CE 1639

ATTREZZATURA  
*Endodontica*

PARTNERSHIP WITH **SANI**

REV.1\_05-2023

# MOTORE ENDODONTICO

*Edo-1* **PRO**

## Rilevatore apicale + Motore endodontico wireless

Il motore endodontico wireless **EDO-1 Pro** è un dispositivo progettato per migliorare notevolmente l'efficienza e la precisione nei trattamenti endodontici.

**EDO-1 Pro** ha un peso ridotto (140 g), testina miniature (Ø 8 mm) orientabile a 360°, push-button. Grazie al suo microprocessore, è totalmente programmabile: velocità di rotazione, tipo di movimento (rotazione dx, sx o reciprocante), torque, pedale esterno wireless.

**EDO-1 Pro** è dotato di un **rilevatore apicale integrato** che facilita l'utilizzo e offre la possibilità di interfacciarsi tramite connettività **Bluetooth** con il rilevatore esterno **AL-1**, permettendo un maggiore comfort grazie alla dimensione del display.

### Caratteristiche:

- Movimento: dx, sx e reciprocante
- Velocità: min 150 RPM, max 1.000 RPM
- Torque: min 0,6 Ncm, max 4,0 Ncm
- Batteria ricaricabile
- Rilevatore apicale integrato
- Apice endodontico impostabile
- Testina ruotabile a 360°
- Schermo ruotabile
- Spegnimento automatico

### Packaging:

- Manipolo
- Alimentatore USB
- Cavo alimentazione
- Cavo per rilevatore int. "A"
- Cavo per rilevatore ext. "B"
- Pinza per strumento
- Clip labiale
- Attacco lubrificazione
- Supporto per manipolo
- Pedale wireless (OPZIONALE)

Selezione valori

Scorrimento programmi [1-10]

Selezione impostazioni

Programmazione



Rotazione a 360°

\*Disponibile su richiesta

Edo-1 PRO - Endodontic Motor - Nero	790015
Edo-1 PRO - Endodontic Motor - Rosa*	790016



# RILEVATORE APICALE

*AL-1*

## Rilevatore apicale wireless

**AL-1** è un rilevatore apicale di ultima generazione che utilizza una **tecnologia di misurazione multifrequenza**, assicurando un'elevata precisione nella localizzazione dell'apice.


Il display offre una doppia modalità di visualizzazione: numerica e segmentale con sezioni di diverso colore che permettono di **identificare facilmente la lunghezza dell'apice**, offrendo al professionista una visione chiara del processo di lavoro.

**La lunghezza di lavoro è impostabile**, consentendo ai professionisti di adattare il dispositivo alle specifiche esigenze.

**AL-1** può essere collegato, tramite **Bluetooth**, con il motore endodontico wireless **EDO-1 Pro**, offre un controllo ottimale e una precisione senza precedenti nelle procedure endodontiche.

### Packaging:

- Rilevatore apicale
- Alimentatore USB
- Cavo alimentazione
- Cavo per rilevatore int. "A"
- Cavo per rilevatore ext. "B"
- Pinza per strumento
- Clip labiale

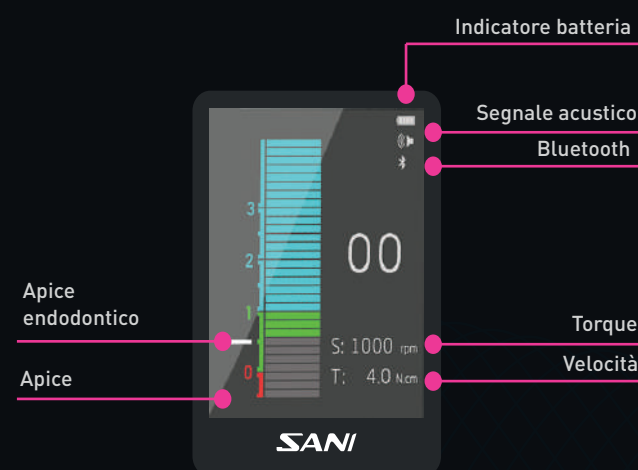

Indicatore batteria

Segnale acustico

Bluetooth

Torque

Velocità

Apice endodontico

Apice



AL-1 - Apex Locator 790010



# INIETTORE GUTTAPERCA

*EasyFill*

## Iniettore di guttaperca

**EasyFill** è un dispositivo endodontico senza fili, progettato per sigillare il terzo coronale con guttaperca mediante la tecnica tridimensionale.

**EasyFill** ha **tre valori di temperatura selezionabili tra 100, 150 e 200°C**, raggiungendo i 200°C in soli 18 secondi.

L'otturazione viene eseguita utilizzando un ago calibrato connesso al manipolo, realizzato in materiale ad alta conducibilità termica. La confezione include **6 aghi di diverse dimensioni (23G, 25G) e lunghezze (24-28 mm)**, consentendo al professionista di selezionare la misura e la lunghezza più appropriata in base alla tipologia del canale.

### Caratteristiche:

- Temperatura: min 100°C, max 200°C
- Riscaldamento a 200°C in 18"
- Chiusura ermetica anti fuoriuscita
- Ricaricabile con base di ricarica

### Packaging:

- Iniettore di guttaperca
- Base di ricarica
- Alimentatore USB
- Cavo alimentazione
- 2 puntali per guttaperca 23G - 24 mm
- 2 puntali per guttaperca 25G - 24 mm
- 2 puntali per guttaperca 25G - 28 mm
- 1 Cover in gomma per puntali
- Chiave per puntali



Puntali per guttaperca



Chiave per puntali



EasyFill - Gutta Pack 790035