


# PRO FLEX *N.H.A*

NANO RIVESTITO ATTIVAZIONE TERMICA

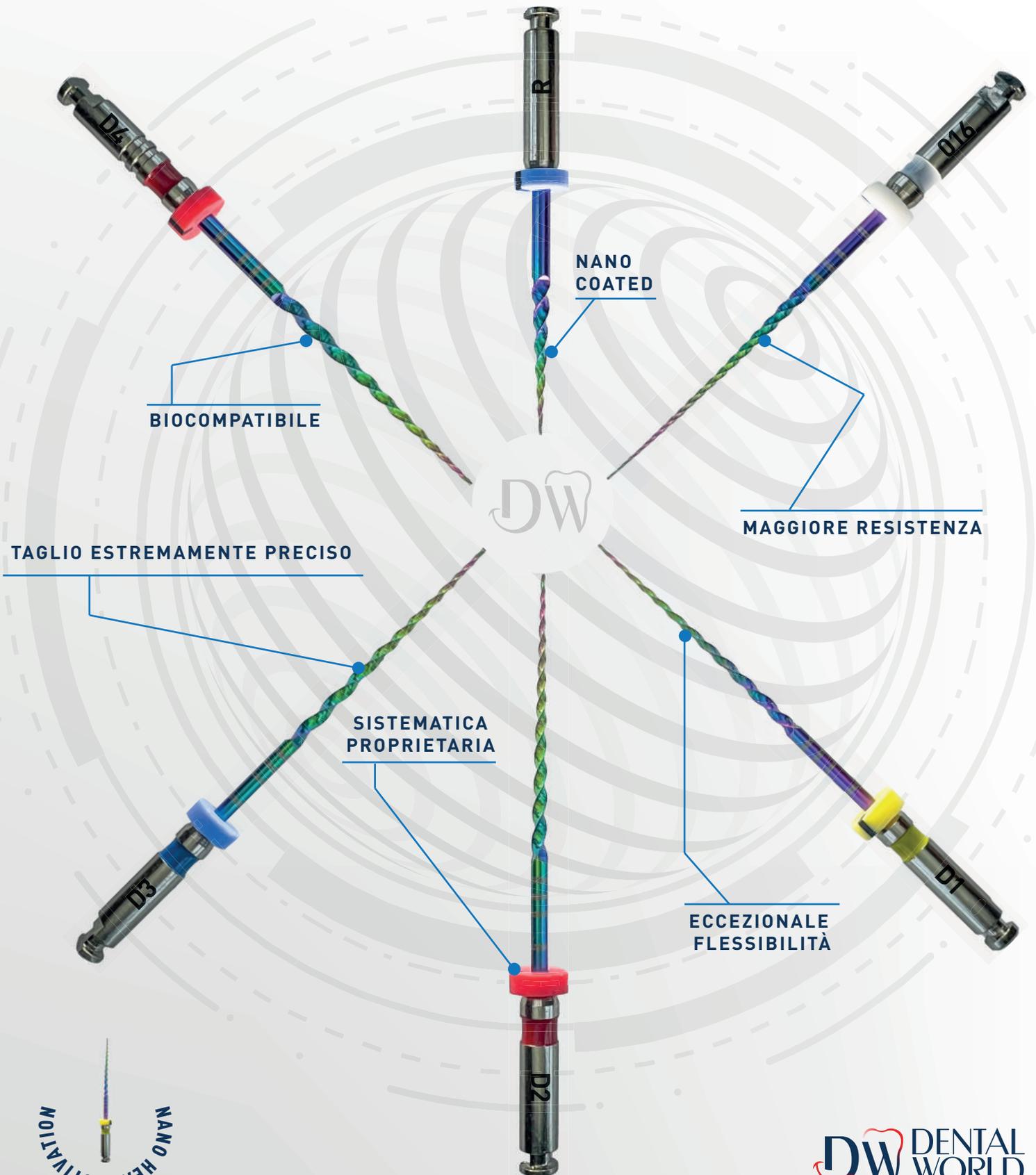

BIOCOMPATIBILE

NANO COATED


MAGGIORE RESISTENZA

TAGLIO ESTREMAMENTE PRECISO

SISTEMATICA PROPRIETARIA

ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ

NANO HEAT ACTIVATION

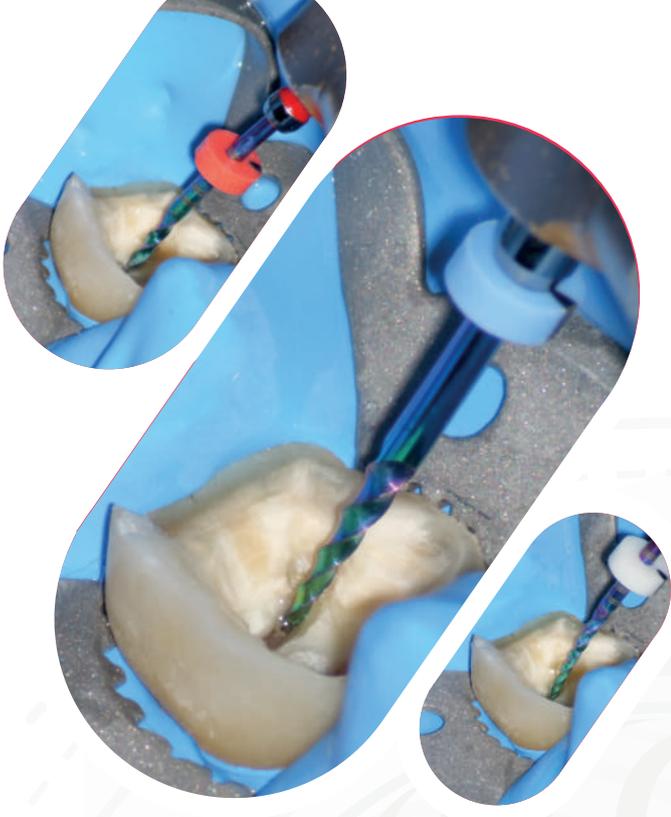

# PRO FLEX NHA

**Pro Flex NHA** è una sistemica progettata con una sezione trasversale triangolare e un trattamento termico proprietario che ne conferisce un eccellente controllo della memoria e una flessibilità per curve fino a 90°, adattandosi anche alle anatomie canalari più complesse.

La tecnologia utilizzata nel trattamento di attivazione termica del **Pro Flex NHA** e il rivestimento con nanoparticelle assicurano agli strumenti una flessibilità del **70% in più** e una resistenza alla fatica ciclica **fino a 3 volte** superiore rispetto a un qualsiasi strumento trattato termicamente.

**CONTROL**  
MEMORY




SEZIONE TRANGOLARE TRASVERSALE

LAMA PRECISA E TAGLIENTE




## Resistenza alla flessione

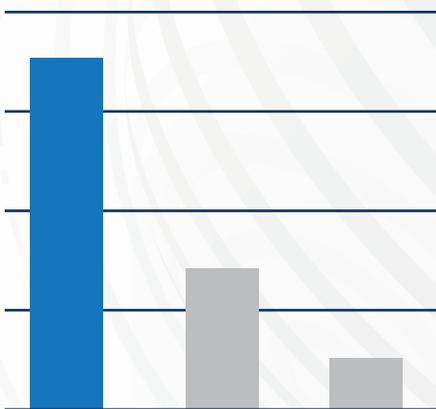

Numero di giri fino alla rottura

## Resistenza alla torsione ciclica

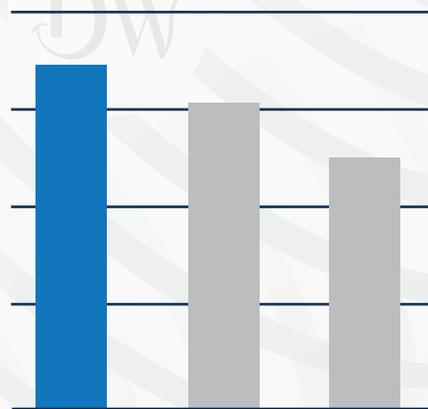

Valore del torque alla rottura

### LEGENDA:

- Pro Flex NHA
- Concorrente 1
- Concorrente 2



## PRIMA


Evidenza radiografica della patologia del canale radicolare.



## DOPO

Radiografia del canale radicolare perfettamente trattato e sigillato grazie alla precisione degli strumenti **Pro Flex NHA**.

# SISTEMATICA PRO FLEX N.H.A

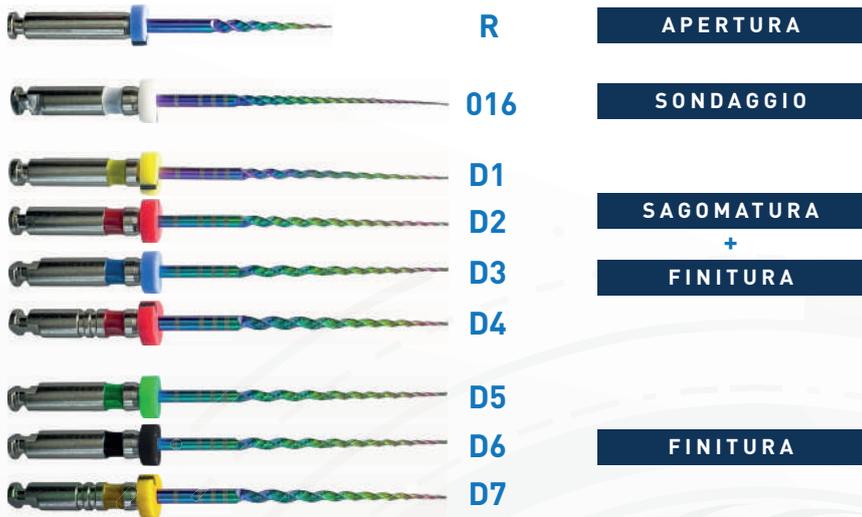

Coming Soon

La sistemática di **Pro Flex NHA** inaugura una nuova era nel trattamento dei canali radicolari, distinguendosi per la sua facilità di utilizzo. Questa sistemática, rende i trattamenti notevolmente più semplici, rispettando l'anatomia del canale radicolare evitando la formazione di sporgenze, l'indebolimento o la perforazione con una precisione senza precedenti.

Creati e sviluppati in esclusiva da Dental World, gli strumenti **Pro Flex NHA** offrono ai professionisti un'alternativa intuitiva e affidabile rispetto agli strumenti canalari tradizionali, assicurando nel contempo un trattamento conservativo di eccellenza.

## PACKAGING



Gli strumenti canalari **Pro Flex NHA** sono confezionati in blister da 6 pezzi, garantendo praticità, integrità e protezione dagli agenti contaminanti.

PRO FLEX NHA									
	∅	%	N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mm	Cross-section	Match gutta point
R	20	10	2,5	350	17 mm REF: 144900550				
○ 016	15	2-6	2,5	300	144900551	144900561	144900571	-	
● D1	20	4	2,5	150-350	144900552	144900562	144900572	20/04	
● D2	25	4	2,5	150-350	144900553	144900563	144900573	25/04	
● D3	30	4	2,5	150-350	144900554	144900564	144900574	30/04	
● D4	25	6	2,5	150-350	144900555	144900565	144900575	25/06	
R-D4	--	--	2,5	--	144900556	144900566	144900576	-	
● D5	35	4	2,5	150-350	144900557	144900567	144900577	35/04	
● D6	40	4	2,5	150-350	144900558	144900568	144900578	40/04	
● D7	50	4	2,5	150-350	144900559	144900569	144900579	50/04	
D5-D7	--	--	2,5	--	144900560	144900570	144900580	-	

Coming Soon

\* La velocità e il torque sono indicativi e possono variare a seconda del dispositivo utilizzato e delle preferenze dell'operatore.

Legenda: ∅: Diametro; %: Conicità; N/cm: Torque; RPM: Velocità



Prodotto da:

 **DENTAL WORLD S.r.l.**

Via Antichi Pastifici, 15 Molfetta (BA) - ITALY  
Tel. +39 080 3381004 / Fax. +39 080 3386617  
[www.dental-world.it](http://www.dental-world.it) / [info@dental-world.it](mailto:info@dental-world.it)