

enbio.

DW
DENTAL WORLD



Enbio + Enbio PRO
Le autoclavi più veloci
del mondo. Classe B.

Designed in Switzerland

Altra misura. Performance elevatissime.

Gli sterilizzatori Enbio sono fino a 6 volte più piccoli e 3 volte più leggeri di una autoclave tradizionale di classe B. Ma quando si tratta di efficienza di lavoro, tengono il passo.



6x
più piccoli

4x
più veloce

3x
più leggeri

Classe B
TriploVuoto

Il tempo è denaro.




In una clinica molto frequentata, con decine di procedure dentistiche o chirurgiche eseguite ogni giorno, ogni momento è essenziale. Enbio cambia completamente il flusso di lavoro della sterilizzazione, permettendo una sterilizzazione di emergenza in pochi minuti, anche per strumenti complessi e costosi.

Enbio 15 min

Enbio PRO 18 min

Autoclave standard fino a 60 min

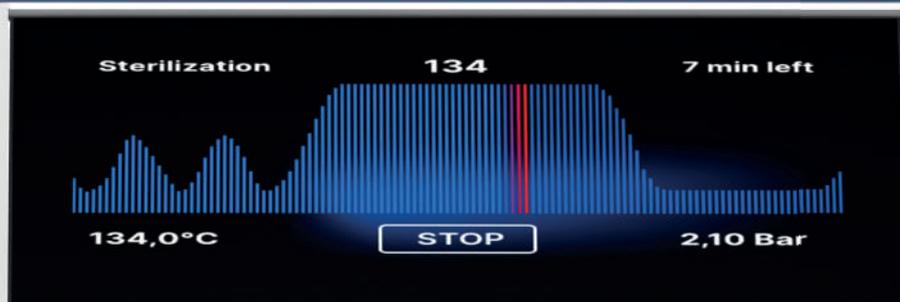

Enbio Magic Filter: ricicla l'acqua e risparmia!

Inizia a usare il Filtro Magico Enbio e risparmi tempo e denaro sui frequenti viaggi per acquistare acqua demineralizzata. Con l'Enbio Magic Filter installato, puoi eseguire fino a 1000 processi con un solo litro di acqua demineralizzata. Non sono necessari rubinetti o lavandini.



**1 litro
di acqua
demineralizzata**

1000 processi*



* - Enbio PRO - 700 processi

Enbio. Speedmaster.

Enbio è così compatta e silenziosa che puoi effettivamente avere un'autoclave a portata di mano in ogni stanza. Puoi anche sterilizzare gli strumenti tra un paziente e l'altro per averli sempre pronti in un attimo.



**Class B
TriploVuoto**



Certificato medico

Dispositivo medico classe II b
EN-13060
Direttiva 93/42/CEE

**Non imbustato
FAST / 134°C**

7 min

**Imbustato
Classe B / 134°C**

15 min

**Imbustato
Classe B / 121°C**

30 min



reddot design award
winner



Peso dell'unità

15 kg

Capacità

Quantità massima di buste (circa) **8**
Peso massimo raccomandato del carico **0,5 kg**
Volume della camera **2,7 l**

Pressione e temperatura

Pressione di lavoro **2,1 Bar**
Pressione massima **2,3 Bar**
Temperatura max. di processo **137°C**

Dimensioni

Larghezza **25 cm**
Altezza **16 cm**
Profondità **56 cm**

Parametri elettrici

Alimentazione elettrica **220-240V 50/60Hz**
Potenza **2,25 kW**
Consumo di energia **10 A**

Varie

Livello di protezione all'ingresso **IP20**
Archiviazione di dati su chiavetta **USB**
Conducibilità dell'acqua* **< 15 µS/cm**

* - solo acqua demineralizzata

Enbio. PRO.

Piccole dimensioni. Grande spazio.

Enbio PRO è la soluzione ideale in un piccolo studio.
Sterilizzazione superveloce e capacità per contenere la maggior parte degli strumenti, comprese i kit per impianti.



Class B
TriploVuoto



Certificato medico

Dispositivo medico classe II b
EN-13060
Direttiva 93/42/CEE

Non imbustato
FAST / 134°C

9 min

Imbustato
Classe B / 134°C

15 min

Imbustato
Classe B / 121°C

30 min

Imbustato / PRION
Classe B / 134°C

43 min



Peso dell'unità

20 kg

Capacità

Quantità massima di buste (circa) **16**
Peso massimo raccomandato del carico **1,0 kg**
Volume della camera **5,3 l**

Pressione e temperatura

Pressione di lavoro **2,1 Bar**
Pressione massima **2,3 Bar**
Temperatura max. di processo **137°C**

Dimensioni

Larghezza **27 cm**
Altezza **20 cm**
Profondità **57 cm**


Parametri elettrici

Alimentazione elettrica **220-240V 50/60Hz**
Potenza **2,45 kW**
Consumo di energia **15 A**

Varie

Livello di protezione all'ingresso **IP20**
Archiviazione di dati su chiavetta **USB**
Conducibilità dell'acqua* **< 15 µS/cm**

* - solo acqua demineralizzata

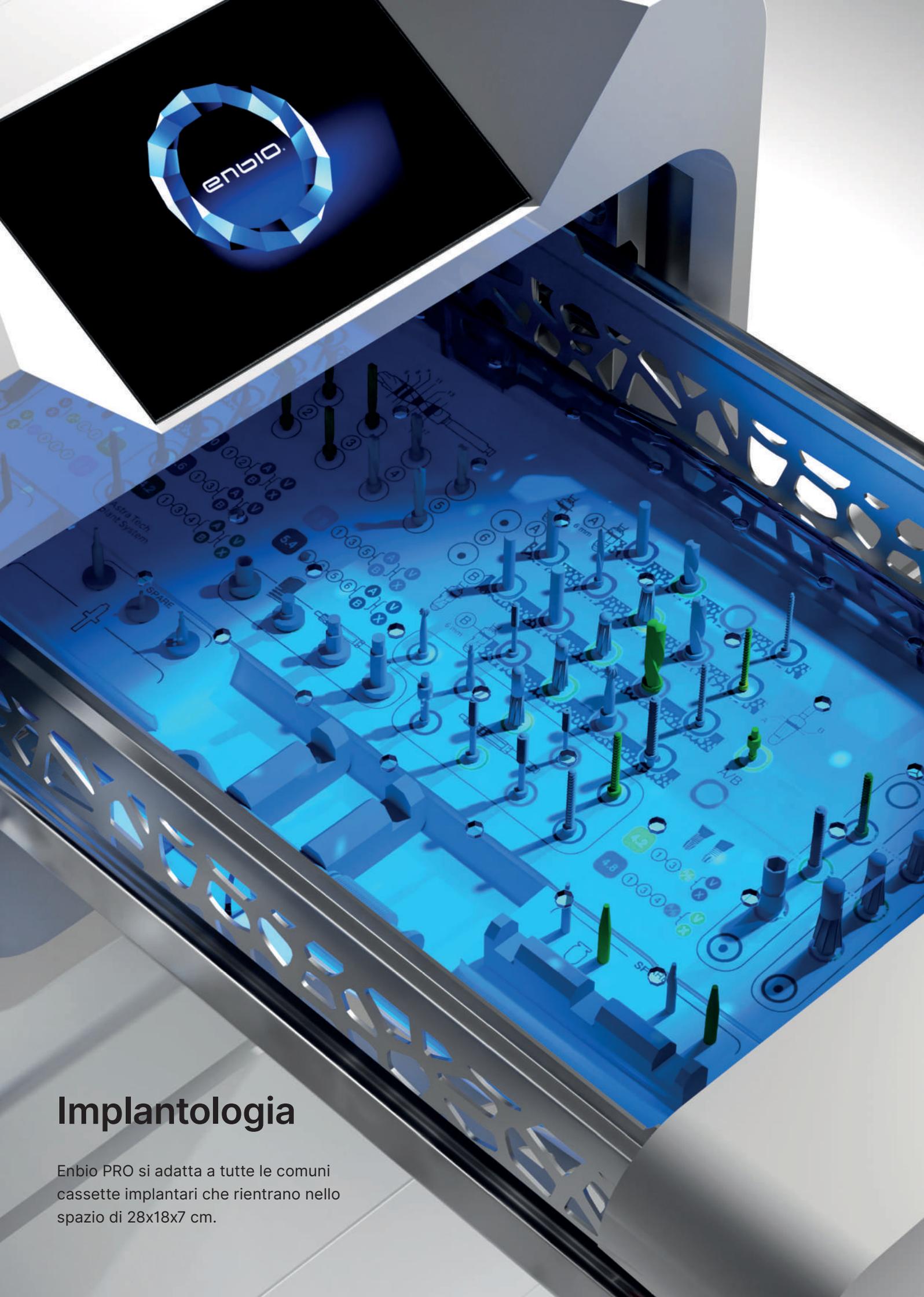


Implantologia

Enbio PRO si adatta a tutte le comuni cassette implantari che rientrano nello spazio di 28x18x7 cm.

Tecnologia all'avanguardia.

Le autoclavi di Enbio sono il risultato di anni di ricerche approfondite e all'avanguardia nel settore della tecnologia medica.

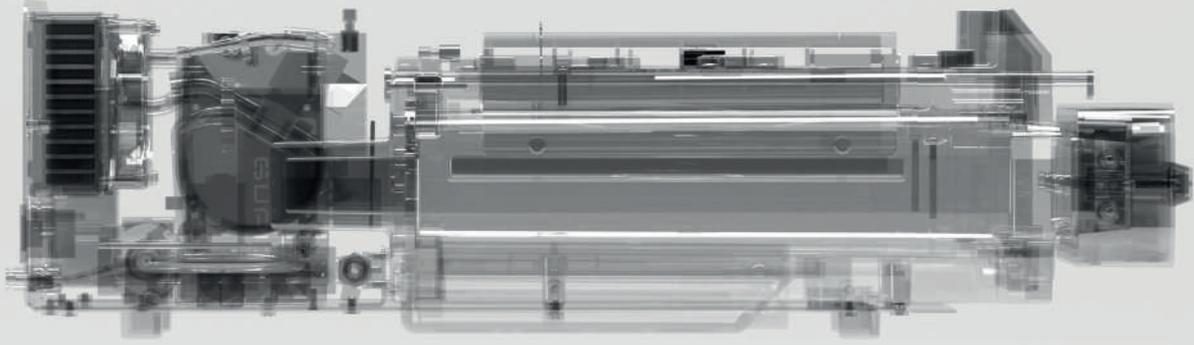

Superfacile.

L'installazione e il funzionamento delle autoclavi Enbio non richiede alcun addestramento speciale.



1. Accendere l'autoclave
2. Selezionare il programma
3. Premere l'avvio



Una rete crescente di oltre 200 distributori in quasi 50 paesi lavora per portare la rivoluzione Enbio a casa tua. Scansiona il codice QR e trova il distributore più vicino a te.

Presenza mondiale.



Le autoclavi Enbio sono prodotte nell'UE e distribuite globalmente attraverso centri logistici che coprono Europa, Nord America e Medio Oriente.

FUSSEN

INNOVATION WIRELESS SCANNER

S7000



www.fussengroup.com



Designed 
in Switzerland



Enbio Group AG
Eichengasse 3, 4702 Oensingen
Switzerland

enbio.com



Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - Molfetta (BA)
Italy

www.dental-world.it