

# ORTHO FORM

Placche termoformabili

*Thermoforming sheets*



REF 00XXXXR



Ø 120 mm

REF 00XXXXRB



Ø 134 mm

REF 00XXXXRS



Ø 125 mm

REF 00XXXX




125 x 125 mm

## DESCRIPTION

Ortho Form sono dischi termoplastici rigidi e morbidi, per qualsiasi tipo di lavorazione come mascherine per sbiancamento, bite per bruxismo, applicazioni per ATM, mascherine di contenzione, etc. Disponibile nelle misure: 125 x 125 mm, Ø 120 mm, Ø 125 mm, Ø 134 mm

*Ortho Form hard and soft thermoforming sheets, recommended for any kind of working, such as bleaching masks, bite for bruxism, ATM applications, contention masks etc. Available in: 125 x 125 mm, Ø 120 mm, Ø 125 mm, Ø 134 mm*

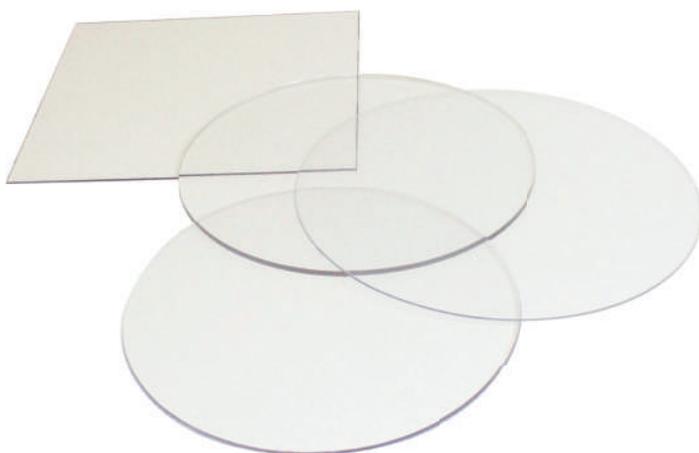

## INDICATIONS

- Per i modelli si consiglia l'utilizzo di un gesso di III classe  
*The use of a 3rd class gypsum is recommended for models*
- Evitare l'utilizzo di gessi troppo duri (causerebbero la rottura del modello in fase di distacco)  
*The use of excessively hard gypsums is not recommended (they may cause the break of the model during the separation step)*
- Per ottenere un buon dettaglio il gesso deve avere un'ottima permeabilità all'aria  
*To obtain a great detail, the gypsum must have an excellent permeability to air*
- Il modello in gesso non dev'essere assolutamente bagnato, al massimo può essere umido  
*The gypsum model mustn't be absolutely wet, but at most only damp*
- In caso di modelli alti, si consiglia di ridurli con una squadramodelli, o immergerli in sfere di acciaio in modo da far fuoriuscire solo la parte da termoformare  
*In case of high models, it's better to make a reduction with a melting machine, or put them in steel spheres to facilitate the leak of the thermoforming section*
- Eliminare eventuali bolle causate dalla colatura del gesso  
*Remove possible bubbles caused by the trickle of the gypsum*
- Valutare le caratteristiche tecniche / fisiche dei fogli termoplastici prima dell'utilizzo  
*Evaluate the technical / physical features of the thermoforming sheets before their use*

# SOFT FORM

Etilenvinilacetato (EVA), indicato per mascherine di sbiancamento, patologie ATM, fluoro profilassi, docce morbide per Bruxismo.

*Eva material, recommended for bleaching masks, ATM pathologies, fluoride prophylaxis, Bruxism.*

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
1,0 mm	24 pcs	001817	001817R	001817RS	001817RB
1,5 mm	20 pcs	001835	001835R	001835RS	001835RB
2,0 mm	20 pcs	001836	001836R	001836RS	001836RB
3,0 mm	10 pcs	001837	001837R	001837RS	001837RB
4,0 mm	10 pcs	001838	001838R	001838RS	001838RB

# DURA FORM

Polietilene tereftalato, indicato per matrici provvisorie, docce dure per Bruxismo e sbiancamento, cucchiari chirurgici e applicazioni in ortodonzia.

*Polyethylene terephthalate recommended for temporary matrix, Bruxism and bleaching bites, surgical tray and orthodontic appliances.*

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
0,5 mm	24 pcs	001828	001828R	001828RS	001828RB
0,8 mm	24 pcs	001827	001827R	001827RS	001827RB
1,0 mm	24 pcs	001823	001823R	001823RS	001823RB
1,5 mm	20 pcs	001824	001824R	001824RS	001824RB
2,0 mm	20 pcs	001825	001825R	001825RS	001825RB
3,0 mm	10 pcs	001833	001833R	001833RS	001833RB

# DUAL FORM

Placca a due strati, strato duro SBS e strato morbido EVA. Consigliata per docce rigide per Bruxismo, patologie ATM ed applicazioni in ortodonzia.

*Plate with two layers, SBS hard layer and EVA soft layer. Suitable for Bruxism, ATM pathologies orthodontic appliances.*

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
2 mm	10 pcs	001943	001943R	-	-
3 mm	10 pcs	001939	001939R	-	-

# BASE PLATE FORM

Stirene ad alta compressione. Indicato per cucchiari per montaggi in protesi totale e supporti rinforzati per valli di cera (masticoni).

*High compression styrene. Recommended for trays and reinforced supports to fit complete dentures.*

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
1,5 mm	24 pcs	001819	001819R	-	-
2,0 mm	20 pcs	001818	001818R	-	-
2,5 mm	10 pcs	001820	001820R	-	-

# COPING FORM

Polipropilene opaco, indicato per ponti e corone provvisorie, cappette calcinabili.

*Opaque polypropylene suitable for temporary bridges and crowns, castable copings.*

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
0,5 mm	24 pcs	001830	001830R	-	-
0,8 mm	24 pcs	-	001831R	-	-
1,0 mm	24 pcs	001832	001832R	-	-

# TRAY FORM

Stirene ad alta compressione. Indicato per portaimpronte individuali.

*High compression styrene. Recommended for individual impression trays.*

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
3 mm	10 pcs	001822	001822R	-	-