

FUSSEN




Scanner per lastre ai fosfori *F200*  
Sistema di diagnostica per immagini RX



## Supporto stampanti classiche

Supporto per formati digitali  
Dicom, Dicomdir, BMP e JPG, inviabili  
tramite Email e WhatsApp

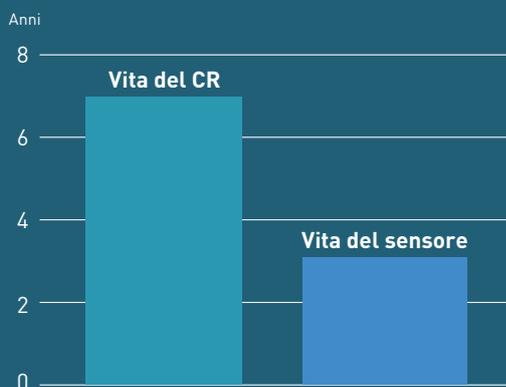

## Confronto con sensore RVG

F200 è più flessibile e confortevole rispetto ai  
sistemi RVG. Il ciclo di utilizzo è di 8 - 10 anni.



## Lastre ai fosfori flessibili

4 misure per tutte le applicazioni

Spessore di 0.1 mm

Flessibili fino a 300°

Riutilizzabili fino a 2000 volte

## Formati disponibili

0

A2WLMU

22x31 mm

1

A2WLMU

24x40 mm

2

A2WLMU

31x41 mm

3

A2WLMU

27x54 mm



## Protocollo operativo:



Posizionare la lastra ai fosfori all'interno della bocca del paziente e scattare con l'apparecchio radiografico



Estrarre la lastra ai fosfori dalla guaina protettiva



Inserire la lastra ai fosfori nella macchina per la lettura



Con una risoluzione fino a 25  $\mu\text{m}$  mostra chiaramente le immagini del legamento parodontale, dell'osso trabecolare e della cavità pulpare, aiutando i medici a diagnosticare e trattare con facilità la situazione clinica.



La migliore qualità di imaging al mondo.  
Supporta apparecchi a raggi-x DC e AC



Prodotto affidabile e di qualità n. 1 al mondo.  
Il primo PSP al mondo con 2 anni di garanzia



## Semplice e multifunzione

Aiuta i medici ad effettuare delle diagnosi cliniche corrette



## Autoinstallante, sincronizzazione multiporta e connessione illimitata

Supporto per più PC, sincronizzazione delle immagini tramite la porta del telefono



Dimensione delle lastre supportate

Misura 0: 22x31 mm

Misura 1: 24x40 mm

Misura 2: 31x41 mm

Misura 3: 27x54 mm

Dimensione teorica dei pixel

25 µm

Interfaccia USB

USB 2.0 - USB 3.0

Documenti fotografici

Cancellazione automatica

Scala di grigi teorica

14bit

Risoluzione teorica

20Lp/mm

Alimentazione

100-240V(AC),50/60Hz, 1.5A

Dimensioni (A\*L\*S)

260x167\*325 mm

Software

DICOM3.0, Sistema di elaborazione delle immagini in multifrequenza

Peso

5.2 kg

Sistema operativo

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

**Prodotto da:**

**Fussen Technology Co.,Ltd**

 3/F, Minlida industrial building B, zone 4, honghualing Industrial Zone,  
1189 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen

 Tel: +86 755 2167 0890 - 813

 Sito: [www.fussengroup.com](http://www.fussengroup.com)

 Email: [sales@fussengroup.com](mailto:sales@fussengroup.com)

**Distribuito da:**

**Dental World S.r.l.**

Via Antichi Pastifici, 15   
70056 - Molfetta (BA) - Italia

Tel: +39 080 3381004 

Sito: [www.dental-world.it](http://www.dental-world.it) 

Email: [info@dental-world.it](mailto:info@dental-world.it) 