



TI INVITO A *sonnidere*
OFFRO IO!



Endodontic Bioceramics

Sealing & Filling Canals / Accessories



OTTIMA FLUIDITÀ

TECNICA A FREDDO

MASSIMA FLUIDITÀ

TECNICA A CALDO



FILLROOTst

REMAKE ROOT^{ht}

il Bioceramico puro
100%
TRISILICATO

Sigillanti bioceramici premiscelati.
Cementi idraulici **FLOW** a base di alluminosilicato di calcio.

Caratteristiche e Benefici


- Generazione di idrossido di calcio
- Sigillatura aderente tridimensionale
- Generazione di idrossiapatite
- Legame chimico alla gutta-percha e alla dentina
- Setting time: lavoro (25 min.)
- Setting time: totale (2,5 hours)
- Nessuna contrazione
- Attivazione in campo umido
- Resistenza 100 MPa

Indicazioni Cliniche

- Canali lunghi
- Canali curvi
- Anatomie complesse
- Ritrattamenti
- Canali radicolari laterali

più di
32.000
casi

Antibatterico

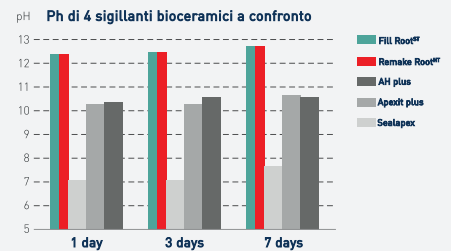

- Valore del pH stabile a 7 giorni
- L'ambiente alcalino lo rende altamente antibatterico
- Previene gli insuccessi clinici


Biocompatibile

- Alluminosilicato di calcio ad alto grado di incontaminazione
- Privo di resina
- Privo di eugenolo


Facile da utilizzare

- Pronto all'uso
- Pasta premiscelata iniettabile monocomponente
- Compatibile con Thermafil

Radiopacità

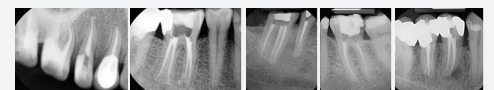

Fill Rootst e Remake Root^{ht} utilizzano ossido di zirconio per agente radiopacizzante con i più alti valori di mercato senza discolorare l'elemento

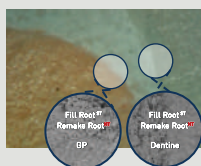

Adesione chimica garantita grazie all'idrossiapatite



Immagine al microscopio del test sulle microinfiltrazioni (test di penetrazione); nessuna infiltrazione rilevata

PACKAGING - FILL ROOTST codice articolo: 0000182


- 1 Siringa Fill Rootst 2 g. ■ 10 puntali intarorali dritti
- 5 puntali intraorali curvi ■ Istruzioni

PACKAGING - REMAKE ROOT^{HT} codice articolo: 0003182

- 1 siringa Remake Root^{ht} 2 g. ■ 10 puntali intraorali dritti
- 5 puntali intraorali curvi ■ Istruzioni



Well-Root™ PT

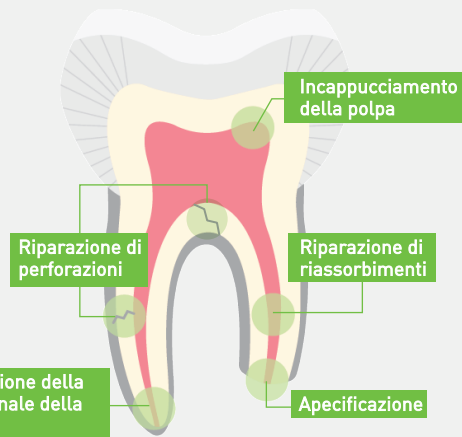

Consistenza plastica che garantisce una massima ergonomia operativa.

PUTTY bioceramico premiscelato.
Alluminosilicato di calcio.


Caratteristiche e Benefici

- Putty premiscelato
- Riempito solo in pasta
- Setting time di lavorazione: 5 ± 2 min
- Setting time di indurimento: 45 ± 5 min
- Elevata resistenza alla compressione (± 125 MPa)
- Effetti antibatterici da pH alcalino
- Eccellente stabilità del colore nel tempo
- Radiopaco
- Idrofilo (washout ideale)
- Packaging in capsule anti spreco

Indicazioni Cliniche

- Perforazioni del pavimento camerale
- Incappucciamento della polpa
- Apicectomia
- Riparazione canalare
- Apical Plug
- Reimpianti ed Autotrapianti


Biocompatibile

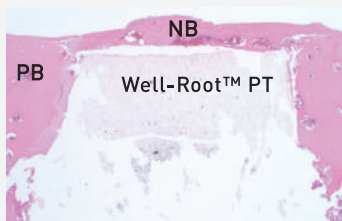

PB: Osso pre-esistente / NB: Nuovo osso

- Well-Root™ PT non crea un principio infiammatorio
- Well-Root™ PT favorisce la mineralizzazione
- Bioattivo

Cambiamento del PH nel Well-Root™ PT

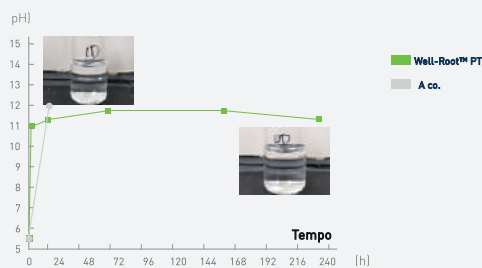

(Conservare in acqua distillata in un incubatore a 37°C)

- Antibatterico per pH alcalino, stabile a 10 giorni

PACKAGING - WELL-ROOT™ PT codice articolo: **00340179**

- 10 capsule* da 0,25 g. cad.
 - Istruzioni
- * capsule confezionate singolarmente

PACKAGING - WELL-ROOT™ PT SMALL codice articolo: **00340159**

- 2 capsule* da 0,25 g. cad.
 - Istruzioni
- * capsule confezionate singolarmente

Pro Ring

Misuratore endodontico ad anello



144510116 Pro Ring

Endo Clor

Soluzione ad uso odontoiatrico per lavaggi canalari - 250ml



0000181 Endo Clor

Silicon Endo Daisy

Stopper in silicone



144510118 Silicon Endo Daisy

Dispenser capsule


Dispenser per capsule da 0.25 g



M3090 Dispenser per capsule

Files Holder

Porta strumenti in plastica

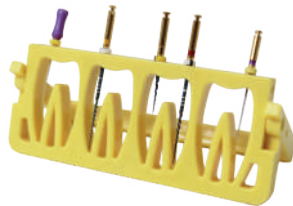

144510115 Files Holder

Triple Endo

Dispenser con misuratore autoclavabile a 134°C



144510125 Triple Endo - Assortito

Fill Root Aghetti

Aghetti in plastica endodontici



00340219-20	Aghetti curvi 45° - 20 pz.
00340219-50	Aghetti curvi 45° - 50 pz.
00340119-20	Aghetti dritti - 20 pz.
00340119-50	Aghetti dritti - 50 pz.

Siringa per bioceramico



PL-4866 Siringa per bioceramico

Triple Gutta

Misuratore, calibratore e taglierina per Gutta percha



144510127 Triple Gutta

Endo Clean

Contenitore per pulizia strumenti



144510121 Endo Clean

