

MOTORE ENDODONTICO

Edo-1 PRO

Rilevatore apicale + Motore endodontico wireless

Il motore endodontico wireless **EDO-1 Pro** è un dispositivo progettato per migliorare notevolmente l'efficienza e la precisione nei trattamenti endodontici.

EDO-1 Pro ha un peso ridotto (140 g), testina miniatura (Ø 8 mm) orientabile a 360°, push-button. Grazie al suo microprocessore, è totalmente programmabile: velocità di rotazione, tipo di movimento (rotazione dx, sx o reciprocante), torque, pedale esterno wireless.

EDO-1 Pro è dotato di un **rilevatore apicale integrato** che facilita l'utilizzo e offre la possibilità di interfacciarsi tramite connettività **Bluetooth** con il rilevatore esterno **AL-1**, permettendo un maggiore comfort grazie alla dimensione del display.

Caratteristiche:

- Movimento: dx, sx e reciprocante
- Velocità: min 150 RPM, max 1.000 RPM
- Torque: min 0,6 Ncm, max 4,0 Ncm
- Batteria ricaricabile
- Rilevatore apicale integrato
- Apice endodontico impostabile
- Testina ruotabile a 360°
- Schermo ruotabile
- Spegnimento automatico

Packaging:

- Manipolo
- Alimentatore USB
- Cavo alimentazione
- Cavo per rilevatore int. "A"
- Cavo per rilevatore ext. "B"
- Pinza per strumento
- Clip labiale
- Attacco lubrificazione
- Supporto per manipolo
- Pedale wireless (OPZIONALE)

Selezione valori

Scorrimento programmi (1-10)

Selezione impostazioni

Programmazione



Rotazione a 360°

*Disponibile su richiesta

Edo-1 PRO - Endodontic Motor - Nero	790015
Edo-1 PRO - Endodontic Motor - Rosa*	790016



RILEVATORE APICALE

AL-1

Rilevatore apicale wireless

AL-1 è un rilevatore apicale di ultima generazione che utilizza una **tecnologia di misurazione multifrequenza**, assicurando un'elevata precisione nella localizzazione dell'apice.


Il display offre una doppia modalità di visualizzazione: numerica e segmentale con sezioni di diverso colore che permettono di **identificare facilmente la lunghezza dell'apice**, offrendo al professionista una visione chiara del processo di lavoro.

La lunghezza di lavoro è impostabile, consentendo ai professionisti di adattare il dispositivo alle specifiche esigenze.

AL-1 può essere collegato, tramite **Bluetooth**, con il motore endodontico wireless **EDO-1 Pro**, offre un controllo ottimale e una precisione senza precedenti nelle procedure endodontiche.

Packaging:

- Rilevatore apicale
- Alimentatore USB
- Cavo alimentazione
- Cavo per rilevatore int. "A"
- Cavo per rilevatore ext. "B"
- Pinza per strumento
- Clip labiale

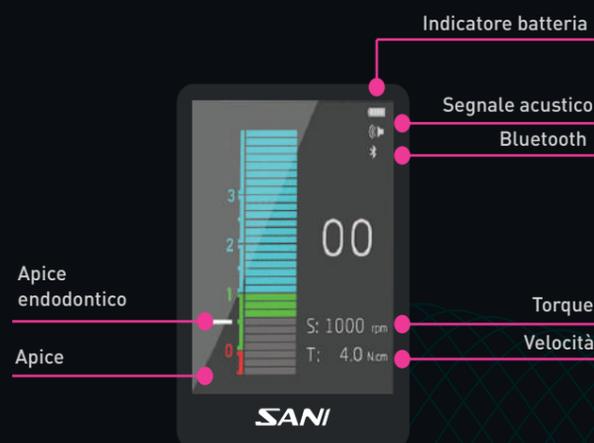

Indicatore batteria

Segnale acustico

Bluetooth

Torque

Velocità

Apice endodontico

Apice



AL-1 - Apex Locator 790010



INIETTORE GUTTAPERCA

EasyFill

Iniettore di guttaperca

EasyFill è un dispositivo endodontico senza fili, progettato per sigillare il terzo coronale con guttaperca mediante la tecnica tridimensionale.

EasyFill ha **tre valori di temperatura selezionabili tra 100, 150 e 200°C**, raggiungendo i 200°C in soli 18 secondi.

L'otturazione viene eseguita utilizzando un ago calibrato connesso al manipolo, realizzato in materiale ad alta conducibilità termica. La confezione include **6 aghi di diverse dimensioni (23G, 25G) e lunghezze (24-28 mm)**, consentendo al professionista di selezionare la misura e la lunghezza più appropriata in base alla tipologia del canale.

Caratteristiche:

- Temperatura: min 100°C, max 200°C
- Riscaldamento a 200°C in 18"
- Chiusura ermetica anti fuoriuscita
- Ricaricabile con base di ricarica

Packaging:

- Iniettore di guttaperca
- Base di ricarica
- Alimentatore USB
- Cavo alimentazione
- 2 puntali per guttaperca 23G - 24 mm
- 2 puntali per guttaperca 25G - 24 mm
- 2 puntali per guttaperca 25G - 28 mm
- 1 Cover in gomma per puntali
- Chiave per puntali



Puntali per guttaperca



Chiave per puntali

EasyFill - Gutta Pack 790035

CONDENSATORE

EasyPack

Condensatore di guttaperca

Easy Pack è un condensatore di guttaperca utilizzato per la compattazione della guttaperca nella sigillatura del terzo apicale, del terzo medio e dei canali laterali, nonché attivazione di soluzioni intracanalari irrigative attraverso il riscaldamento del plugger.

Offre **cinque temperature selezionabili tra 90, 150, 180, 200 e 230°C**.



Dotato di **display LED** per il monitoraggio delle impostazioni e basetta di ricarica USB-C.

Caratteristiche:

- Temperatura: min 90°C; max 230°C
- Riscaldamento rapido
- Batteria ricaricabile con base di ricarica USB-C

Plugger:

- Fine - 04 - Bianco
- Fine/Medio - 06 - Nero
- Medio - 08 - Rosso
- Medio/Largo - 10 - Giallo

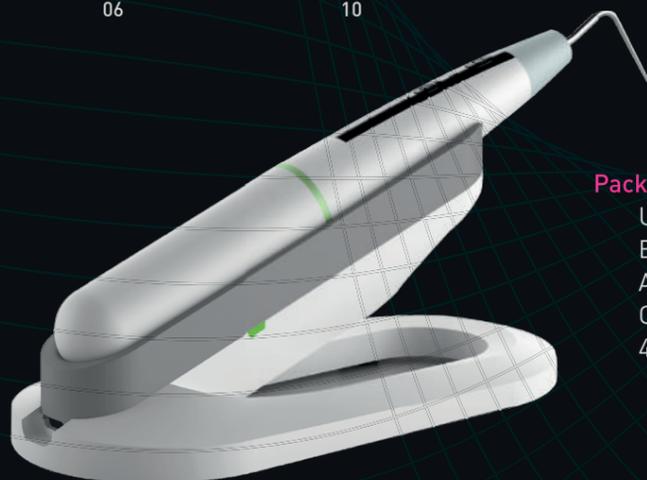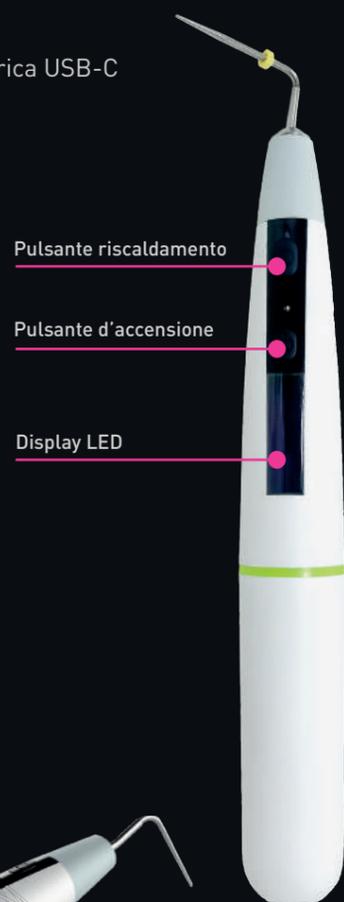

Packaging:

- Unità centrale
- Base di ricarica
- Alimentatore USB
- Cavo alimentazione
- 4 plugger

Easy Pack - Compact Pack **790025**

SPARE PARTS

Edo-1 PRO

Edo-1 PRO - Testina ricambio	790017
Edo-1 PRO - Batteria	790018
Edo-1 PRO - Attacco per lubrificazione	790019
Edo-1 PRO - Pedale wireless	790020
Edo-1 PRO - Cover protettiva	790021

EasyFill

EasyFill - Base di ricarica	790036
EasyFill - Gutta refill	790037
EasyFill - Cover protettiva	790038
EasyFill - Chiave per puntali	790039
* EasyFill - Puntale da iniezione - 20G - 24 mm	790040
* EasyFill - Puntale da iniezione - 20G - 28 mm	790041
EasyFill - Puntale da iniezione - 23G - 24 mm	790042
* EasyFill - Puntale da iniezione - 23G - 28 mm	790043
EasyFill - Puntale da iniezione - 25G - 24 mm	790044
EasyFill - Puntale da iniezione - 25G - 28 mm	790045
* EasyFill - Puntale da iniezione - 27G - 24 mm	790046
* EasyFill - Puntale da iniezione - 27G - 28 mm	790047

EasyPack

EasyPack - Base di ricarica	790026
EasyPack - Puntale F - 04 - Bianco	790027
EasyPack - Puntale F/M - 06 - Nero	790028
EasyPack - Puntale M - 08 - Rosso	790029
EasyPack - Puntale M/L - 10 - Giallo	790030

Standard

Cavo per rilevatore int. "A" ¹	790049
Cavo per rilevatore ext. "B" ¹	790050
Clip labiale ¹	790051
Pinza per strumento ¹	790052
Cavo alimentazione ²	790053
Alimentatore USB - DC5V/1.0A ³	790054
Alimentatore USB - DC5V/2.0A ⁴	790055
Batteria di ricambio ⁵	790056

Legenda:

- 1: Compatibile con Edo-1 PRO, AL-1
- 2: Compatibile con Edo-1 PRO, AL-1, Easy Fill, Easy Pack
- 3: Compatibile con Edo-1 PRO, AL-1, Easy Pack
- 4: Compatibile con Easy Fill
- 5: Compatibile con Easy Fill e Easy Pack
- *: Disponibile su richiesta



Distribuito da:

DENTAL WORLD S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 Molfetta (BA) - ITALY
Tel. +39 080 3381004 / Fax. +39 080 3386617
www.dental-world.it / info@dental-world.it

Prodotto da:

SANI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

666 Jincheng Avenue, HTZ, Chengdu - CHINA
Tel. 0086 28 83361652 / Fax. 0086 28 83361651
www.medicalsani.com



L'EVOLUZIONE ENDODONTICA INIZIA QUI

CE 1639

ATTREZZATURA
Endodontica

PARTNERSHIP WITH **SANI**

REV.3_07-2023