

RESPIRARE È INDISPENSABILE,  
FALLO IN SICUREZZA!



100%  Made in Italy

Prodotto Certificato - CLASSE I TIPO IIR DISPOSITIVO MEDICO

CE - UNI EN 14683:2019 -ISO 22609:2004  
- UNI EN ISO 10993-1:2010



Mascherina chirurgica monouso "Protect Masks" è un Dispositivo Medico di Classe I, Tipo IIR, composta da 3 strati in polipropilene con strato intermedio filtrante. Completamente realizzate in Italia in conformità alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e alle norme tecniche UNI EN ISO 10993-1:2010 e ISO 22609:2004. Ad alta efficienza filtrante, sono leggere e confortevoli sulla pelle.


BFE ≥ 99%\*

\* Su test effettuati

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100 

## 1- Struttura

Progettata per garantire la più alta protezione in tutte le situazioni. Realizzate con materiali di **elevatissima qualità**.

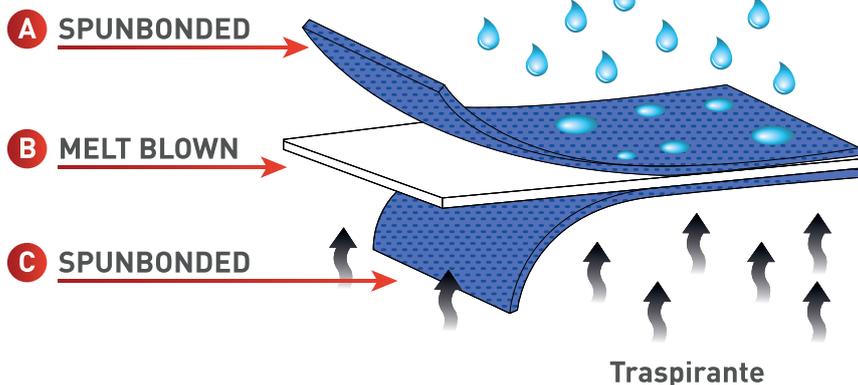

**A** Strato esterno in **Tessuto non Tessuto Spunbonded** idrofobo e antibatterico da 25 g/m<sup>2</sup> 100% polipropilene;

**B** Strato intermedio filtrante in **Tessuto non Tessuto Melt Blown** da 35 g /m<sup>2</sup> 100% polipropilene;

**C** Strato esterno (a contatto con il viso) in **Tessuto Non Tessuto Spunbonded** idrofobo e antibatterico da 25 g /m<sup>2</sup> 100% polipropilene.

## 2- Caratteristiche



Traspiranti e leggere, sono adatte ad un uso prolungato sia all'interno che all'esterno. Progettate per il massimo comfort, copertura e modellabilità, le mascherine chirurgiche Protect Masks **si adattano a tutte le forme di viso.**

- D** La **barra stringinaso** semirigida permette di adattare la mascherina alla propria fisionomia, garantendo perfetta aderenza al volto.
- E** Gli **elastici auricolari** sono realizzati in elastico sottile e resistente, morbidi e confortevoli sulle orecchie.



**D**

### Perfetta Aderenza



**E**



### Alta difesa Massimo Comfort

**100%**  Made in Italy

## 3- Packaging



Confezionamento **nuovo, pratico e sicuro** che permette di decontaminare le mascherine non ancora utilizzate. Dispenser maneggevole dotato al suo interno di buste sigillate da 10 mascherine. In ogni scatola ci sono 50 pezzi.

\* Colori attualmente disponibili:

	Lime*	<b>00700071</b>	Protect Masks - Lime
		<b>00700071-JR</b>	Protect Masks Junior - Lime
	Celeste*	<b>00700072</b>	Protect Masks - Celeste
		<b>00700072-JR</b>	Protect Masks Junior - Celeste
	Verde*	<b>00700073</b>	Protect Masks - Verde
		<b>00700073-JR</b>	Protect Masks Junior - Verde
	Arancione	<b>00700074</b>	Protect Masks - Arancione
		<b>00700074-JR</b>	Protect Masks Junior - Arancione
	Giallo	<b>00700075</b>	Protect Masks - Giallo
		<b>00700075-JR</b>	Protect Masks Junior - Giallo
	Rosa*	<b>00700076</b>	Protect Masks - Rosa
		<b>00700076-JR</b>	Protect Masks Junior - Rosa
	Lilla*	<b>00700077</b>	Protect Masks - Lilla
		<b>00700077-JR</b>	Protect Masks Junior - Lilla
	Blu Med.*	<b>00700078</b>	Protect Masks - Blu Med.
		<b>00700078-JR</b>	Protect Masks Junior - Blu Med.
	Bianco*	<b>00700079</b>	Protect Masks - Bianco
		<b>00700079-JR</b>	Protect Masks Junior - Bianco
	Nero*	<b>00700080</b>	Protect Masks - Nero
		<b>00700080-JR</b>	Protect Masks Junior - Nero
	Jeans*	<b>00700085</b>	Protect Masks - Jeans



### F JUNIOR

Disponibili anche per **BAMBINI**



**F PROTECT MASKS JUNIOR**

Dimensioni: 9 cm x 14,5 cm - Colori disponibili: rosa e celeste